

Cepat Pedoman Mulai!

SunTech Tango M2

STRESS BP

BP Uji Latih Jantung



SunTech Medical, Inc.
507 Airport Boulevard, Suite 117
Morrisville, NC 27560-8200 AS
Tel: + 1.919.654.2300
1.800.421.8626
Faks: +1.919.654.2301
SunTechMed.com



EMERGO Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

SunTech Medical (Shenzhen) Co., Ltd.
105 HuanGuan South Road, Suite 15 2--3/F
DaHe Community Guanlan,
LongHua District, Shenzhen
GuangDong PRC 518110
Tel: + 86.755.29588810
+ 86.755.29588986 (Penjualan)
+ 86.755.29588665 (Servis)
Faks: + 86.755.29588829
SunTechMed.com.CN

MD

CE
0413

82-0124-17 MA Rev. A


SunTech Medical
The Difference in Clinical Grade®

Panel Depan



Tampilan Pengukuran


Tampilan Pengukuran menampilkan pengukuran pasien terkini atau terbaru dalam bentuk numerik.

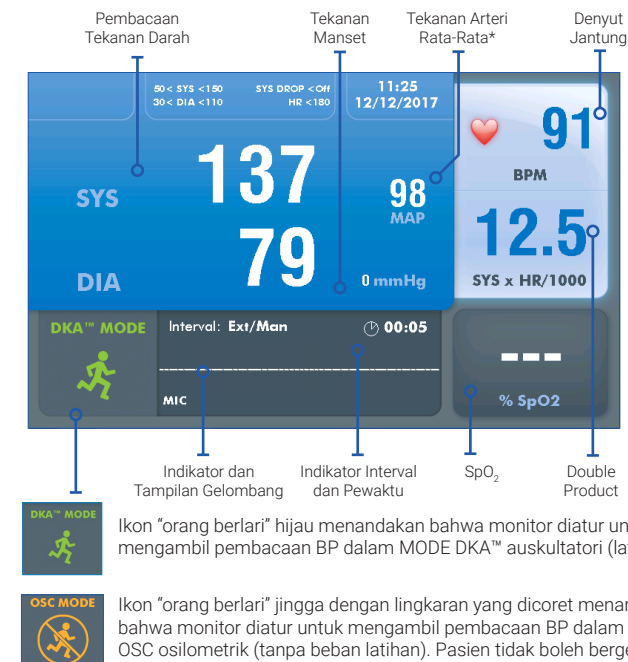

* Tidak tersedia di semua negara, lihat informasinya di Panduan Pengguna.

Tampilan Grafik

Tampilan Grafik menampilkan rangkuman dari pengukuran BP terbaru, selain tampilan numerik dari pembacaan lain.

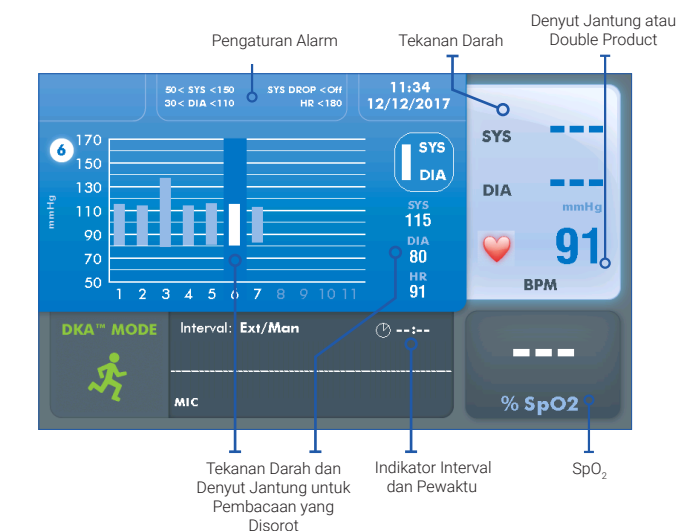

Selamat datang di Tango M2



Terima kasih karena sudah memilih monitor tekanan darah (BP) Tango M2 ini.

Selama lebih dari 30 tahun, SunTech Medical® telah menjadi pemasok yang lebih baik untuk teknologi terdepan dan produk inovatif untuk mendapatkan pengukuran tekanan darah saat pembacaan manual tidak dapat diandalkan atau tidak mungkin dilakukan.

Kini, kami tetap berfokus untuk terus memajukan teknologi tekanan darah bermutu klinis.

Tango M2 merupakan produk terbaru di jajaran Monitor Tekanan Darah Uji Latih Jantung (Stress Test) Tango, didesain secara khusus untuk bekerja dengan sistem uji latih jantung (stress system) Anda.



Petunjuk pengoperasian untuk produk ini bisa didapatkan dalam CD yang disertakan di dalam kotak. Unduh petunjuk pengoperasian produk ini dengan mengunjungi suntechmed.com/library.

Lihat petunjuknya menggunakan Adobe Acrobat Reader, atau pembaca PDF lain yang kompatibel, pada komputer atau perangkat seluler dengan koneksi internet.

Penyiapan dan Operasi Perdana

1

Langkah 1 – Membuka Kemasan Tango M2

Pastikan Anda mempunyai semua komponen yang sesuai. Lihat label kemasan pada baki kotak dalam untuk daftar komponen yang Anda terima berdasarkan pesanan Anda.

Hubungkan Catu Daya ke Kabel Listrik, dan colokkan ke dalam stopkontak listrik AC. Hubungkan Catu Daya ke konektor input DC di belakang monitor.

Gunakan tombol HIDUP/MATI (1) di belakang monitor untuk menghidupkannya. LED biru (2) di atas Tango M2 akan menyala kapan pun monitor dihidupkan.




2

Langkah 2 – Menghubungkan Sistem Uji Latih Jantung

Hubungkan sistem uji latih jantung menggunakan kabel BNC EKG Eksternal dan kabel RS-232 atau USB.

Untuk menghubungkan sistem uji latih jantung Anda, kunjungi www.SunTechMed.com dan pilih: [Support > Customer Technical Support > Download Library > Stress BP Monitors > Tango M2 > Interface Notes](#) (Bantuan > Bantuan Teknis Pelanggan > Unduh Pustaka > Monitor BP Uji Latih Jantung > Tango M2 > Catatan Antarmuka) untuk melihat daftar Catatan Antarmuka yang tersedia.


Anda juga dapat merujuk ke Pustaka Elektronik Tango M2, pilih: [Menu Utama > Penyiapan Monitor > Pustaka Elektronik > Catatan Antarmuka](#) untuk melihat daftar Catatan Antarmuka yang tersedia.

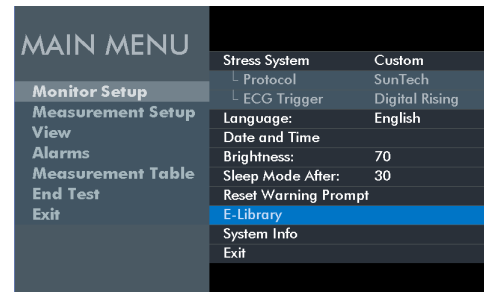

4

Langkah 4 – Mengambil Pengukuran

Tango M2 membutuhkan sinyal EKG untuk mengambil pengukuran BP dan harus diatur ke Mode DKA saat pasien sedang latihan. Setelah uji dimulai, sistem uji latih jantung akan meminta monitor untuk mengambil pembacaan BP. Manset akan mengembang secara otomatis untuk setiap pengukuran. Pesan "Lemaskan lengan BP berlangsung" akan ditampilkan hingga pengukuran selesai; lalu pembacaan akan ditampilkan. Anda juga dapat menekan tombol START/STOP untuk meminta secara manual monitor untuk mengambil pembacaan BP. Tombol yang sama ini dapat digunakan untuk membatalkan pembacaan jika diperlukan.

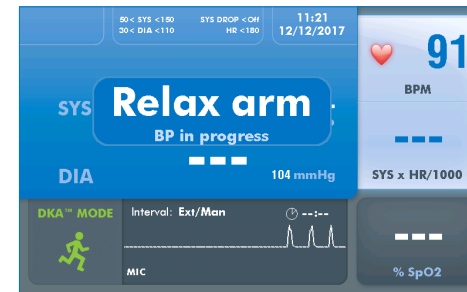

5

Langkah 5 – Mengunduh Data

1. Colokkan flashdisk USB-A ke Tango M2 (1)
2. Gunakan Tombol Panah dan tombol Pilih untuk menavigasi ke [Menu Utama > Tabel Pengukuran >](#) tekan Tombol Pilih.
3. Navigasi ke pilihan Unduh Data dan tekan Tombol Pilih.
4. Pesan akan muncul yang menyatakan Pengunduhan sedang Berlangsung, saat ini sudah selesai tekan Tombol Pilih untuk Keluar. Kini Anda bisa mencabut Flashdisk USB-A tersebut.
5. Hubungkan Flashdisk USB-A ke PC Anda. Saat jendela terbuka, akan ada file yang bernama Hasil. Buka file ini.
6. Di dalam file akan ada dokumen yang perlu diidentifikasi. Nama file diawali dengan tahun disusul dengan bulan dan tanggal serta pengenal lain; susunannya seperti TTTTBBHH#####. Ini adalah pengidentifikasi unik untuk setiap set data BP baru yang diambil dari Tango M2.

Untuk petunjuk selengkapnya silakan melihat Panduan Pengguna.




3

Langkah 3 – Memasang dan Menghubungkan Manset

Gunakan manset tekanan darah Orbit-K™ SunTech atau kit Penggunaan Pasien Tunggal SunTech (berisi manset tekanan darah dan bantalan mikrofon sekali pakai). Bagian ini memberi arah tentang pemilihan ukuran yang sesuai dan penempatan kedua bentuk manset. Penting bahwa manset dicocokkan dengan lengan pasien, dan bahwa mikrofon ditempatkan di atas arteri brakialis (di antara bisep dan trisep)! Ukuran manset yang tidak sesuai dan pemasangan mikrofon yang keliru akan memberikan pembacaan dan akurasi yang buruk.

Manset Orbit-K

- a. Temukan arteri brakialis di lengan kiri.
- b. Geser selubung manset ke lengan pasien, dengan penanda "ARTERY" (ARTERI) menunjuk ke bawah lengan.
- c. Terdapat mikrofon di bawah penanda "ARTERY" (ARTERI). Pastikan bahwa mikrofon ditempatkan di bagian dalam lengan, tepat di atas arteri brakialis di antara bisep dan trisep. Seharusnya ada jarak sekitar 3 hingga 5 cm (lebar dua jari) antara tepi manset dan siku.
- d. Sisipkan konektor mikrofon 3 pin dari manset ke dalam konektor yang bersesuaian pada Kabel Pasien. Konektor dapat disisipkan dalam orientasi apa pun.
- e. Hubungkan slang dari manset ke konektor yang bersesuaian pada Kabel Pasien dan putar.
- f. Lilitkan manset di sekeliling lengan dan eratkan. Gunakan tali pergelangan tangan untuk mengikat kabel ke pergelangan tangan pasien.

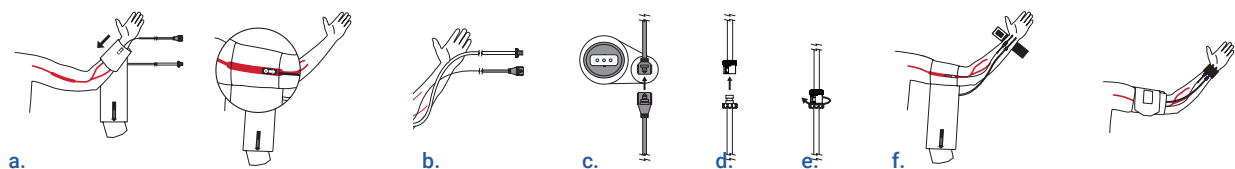

Kit Penggunaan Pasien Tunggal (SPU)

- a. Temukan arteri brakialis di lengan kiri.
- b. Masukkan mikrofon ke dalam bantalan mikrofon. Kupas lapisan pelindung dari bantalan mikrofon. Perhatikan: kit penggunaan pasien tunggal menggunakan mikrofon dari manset Orbit-K.
- c. Pasang mikrofon di lengan pasien dengan memastikan bahwa mikrofon ditempatkan di bagian medial lengan, tepat di atas arteri brakialis di antara bisep dan trisep. Harus ada jarak sekitar 3 hingga 5 cm (lebar dua jari) di antara bantalan mikrofon dan siku.
- d. Lilitkan manset di sekeliling lengan dan eratkan.
- e. Sisipkan konektor mikrofon 3 pin dari manset ke dalam konektor yang bersesuaian pada Kabel Pasien. Konektor dapat dimasukkan dalam arah mana pun. Hubungkan slang dari manset ke konektor yang bersesuaian pada Kabel Pasien dan putar.
- f. Gunakan tali pergelangan tangan untuk mengikat kabel ke pergelangan tangan pasien.

