



SunTech® *Tango*® M2 STRESS BP

Automated Blood Pressure Monitor
for Cardiac Stress and Exercise Testing

GUÍA DEL USUARIO



Revisiones

El número de pieza de esta guía es 80-0055-04 Rev. B. Podrá descargarse una versión actualizada desde el sitio web de SunTech Medical. Si observa algún error u omisión en esta guía, haga el favor de comunicarlo a:

SunTech Medical, Inc.

507 Airport Boulevard, Suite 117

Morrisville, NC 27560 EE.UU.

Tel: 800.421.8626

919.654.2300

Fax: 919.654.2301

Correo electrónico: CustomerService@SunTechMed.com

Sitio web: www.SunTechMed.com

Información de copyright

Todo el contenido de este manual constituye información de propiedad exclusiva de SunTech Medical y se proporciona únicamente para la operación, el mantenimiento y el servicio técnico de Tango M2. Este manual y el Tango M2 que en él se describe están protegidos por las leyes de copyright, por lo que está prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo por escrito de SunTech Medical.

SunTech es una marca registrada de SunTech Medical, Inc. Todos los otros nombres de marcas mencionados son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

La información del presente manual se suministra sólo como guía, está sujeta a cambios sin previo aviso y no debe considerarse como un compromiso de SunTech Medical. SunTech Medical no asume responsabilidad alguna por los posibles errores o inexactitudes de este manual.

© 2014 SunTech Medical. Todos los derechos reservados.



¡Le presentamos el Tango M2!

Gracias por elegir el monitor de presión arterial Tango M2.

Durante más de veinte años, SunTech Medical ha dominado el suministro de productos innovadores con la tecnología más puntera para medir la presión arterial cuando no se pueden obtener o no son fiables las mediciones manuales. Hoy en día nuestra se centra en el continuo avance de la tecnología de monitorización de la presión arterial a nivel médico.

Tango M2 es el último monitor de presión arterial para pruebas de esfuerzo de nuestra serie Tango, diseñado específicamente para integrarse con su sistema de prueba de esfuerzo.



Características nuevas

- Pantalla en color.
- Lecturas oscilométricas (en reposo)
 - » de la PA sin conexión ECG en MODO OSC.
- Nuevo diseño externo.
- Interruptor encendido/apagado.
- Conexión USB
 - » Exportación de datos de PA
 - » Software/firmware fácilmente actualizable.
- Mejora del manguito para una colocación más sencilla para el paciente.

Características mantenidas

- Tecnología auscultatoria en MODO DKA™.
- » **Medida fiable de la PA bajo esfuerzo.**
- Pantalla digital fácil de leer para la PA y otros datos del paciente y visualización de la onda de los sonidos de K.
- Gráfico de la tendencia de las mediciones de la PA.
- Controles intuitivos con un solo botón.
- Configuración sencilla del sistema a través de menús.
- Compatible con una gran variedad de sistemas de pruebas de esfuerzo para recibir disparos de ECG y devolver las lecturas automáticamente.
- Opción de SpO₂.
- Opción de ECG interno.
- Compatible con el manguito de presión arterial Orbit-K de SunTech o con el kit de uso para un solo paciente (manguito desechable) de SunTech.

Si ya ha utilizado algún monitor de presión arterial para pruebas de esfuerzo Tango de SunTech, no lo costará acostumbrarse al nuevo Tango M2.

Índice

iLe presentamos el Tango M2!

Revisiones

Información de copyright

Características nuevas

Características mantenidas

Índice

1. Consideraciones de seguridad

Uso previsto

Indicaciones para el uso

Responsabilidad del usuario

Precauciones y posibles reacciones adversas

Precauciones

Advertencias y contraindicaciones

Iconos, símbolos y abreviaturas

Iconos

Símbolos

Abreviaturas utilizadas frecuentemente

2. Configuración del Tango M2

Desembalaje del monitor

Configuración del panel trasero

Conexión con el sistema de prueba de esfuerzo

Notas de las interfaces/Biblioteca electrónica

ii

i

i

iii

iii

iv

1

1

1

1

2

4

4

6

6

7

9

10

10

11

12

12

Fijación de las conexiones al monitor

Selección de la configuración del monitor y el sistema de prueba de esfuerzo

Verificación de las conexiones

Conexión sin un sistema de prueba de esfuerzo

3. Presentación del Tango M2

Panel frontal

Vista de medición

Vista de gráfico

Menú principal

Configuración del monitor

Configuración de la medición

Vista

Alarmas

Tabla de mediciones

Fin de la prueba

4. Uso del Tango M2 durante una prueba de esfuerzo

Paso 1 - Colocación del manguito de presión arterial

Manguito Orbit-K™

Manguito desechable

Paso 2 - Confirmación de la señal ECG

Paso 3 - Toma de lecturas de presión arterial

Visualización de las lecturas

13

13

14

14

15

15

16

18

20

21

22

24

25

26

28

29

29

30

32

32

33

<i>Lecturas a intervalos regulares</i>	33	9. Mensajes de estado y alarmas	50
<i>Detención de una lectura</i>	33	Mensajes de estado	50
<i>Modo STAT</i>	34	Medidas fuera de rango	55
<i>MODO DKA™ o MODO OSC</i>	34	Alarmas	56
<i>Modo inactivo del monitor</i>	35	Centros de mantenimiento	56
Paso 4 - Preparación para un paciente nuevo	35	10. Preguntas más frecuentes	58
Consejos para realizar una prueba de esfuerzo	36	11. Información técnica	62
5. Uso del Tango M2 sin un sistema de prueba de esfuerzo	38	Declaración de compatibilidad electromagnética	62
Paso 1 - Colocación del manguito de presión	38	Especificaciones: medición de la presión arterial	67
Paso 2 - Conexiones de la señal ECG	38	Avisos acerca de los datos de presión arterial	68
Paso 3 - Toma de lecturas de presión arterial	39	Especificaciones: oxímetro de pulso	68
Paso 4 - Preparación para un paciente nuevo	39	Garantía limitada	68
6. Uso de las opciones del Tango M2	40	Anexo A - Sistemas de prueba de esfuerzo compatibles	70
Oxímetro de pulso (SpO ₂)	40	Anexo B - Cables para los sistemas de prueba de esfuerzo compatibles	72
Auriculares	41	Anexo C - Precisión de la medición del oxímetro SpO₂	74
7. Cuidado del Tango M2	42	Anexo D - Instrucciones de descarga	77
Limpieza	42		
Mantenimiento preventivo	44		
<i>Autocomprobaciones del sistema</i>	44		
<i>Piezas de repuesto</i>	44		
Calibración habitual	45		
Actualizaciones del software	46		
Eliminación	47		
8. Accesorios y piezas de repuesto	48		

Consideraciones de seguridad

1.

Uso previsto

Tango M2 es un monitor de la presión arterial no invasivo, con la opción de medir la saturación de oxígeno (SpO_2), para utilizarse durante pruebas de esfuerzo cardíacas o en ejercicio. Mide y muestra la presión arterial sistólica y diastólica de un paciente y, opcionalmente, el porcentaje de saturación de oxígeno de la sangre arterial.

Use el Tango M2 únicamente para pacientes adultos que realicen una prueba de esfuerzo cardíaca o en ejercicio bajo la supervisión de un médico.

Indicaciones de uso

El monitor de presión arterial no invasivo (PNI) Tango M2 de SunTech Medical con opción de oxímetro de pulso está indicado para la medida y el registro de la presión arterial, el pulso y la saturación de oxígeno funcional de la hemoglobina arterial (SpO_2) de pacientes adultos en hospitales, centros de salud o unidades de subagudos.

Presencia de fibrilación auricular o ventricular, arritmias, marcapasos, etc. que puedan interferir con el funcionamiento normal del monitor Tango M2.

Responsabilidad del usuario

Este producto está diseñado para funcionar de acuerdo con la descripción contenida en este manual y en las etiquetas y módulos insertados adjuntos, siempre que sea montado, utilizado, mantenido y reparado conforme a las instrucciones proporcionadas. Es responsabilidad del usuario:

- Comprobar anualmente el calibrado del dispositivo.
- No utilizar nunca de manera consciente un dispositivo defectuoso.
- Sustituir inmediatamente las piezas rotas, desgastadas, ausentes, incompletas, dañadas o contaminadas.
- Si es necesario realizar una reparación o una sustitución, póngase en contacto con el centro de servicio técnico autorizado más cercano. La lista de los centros autorizados aparece tanto en la guía como en nuestro sitio web www.SunTechMed.com

- 
- La confiabilidad del dispositivo depende de la conformidad con las instrucciones de uso y reparación detalladas en este manual.

Además, el usuario del dispositivo tendrá la total responsabilidad por cualquier mal funcionamiento ocasionado por uso incorrecto, mantenimiento insuficiente, reparación inadecuada, daño o alteración por cualquier agente que no sea SunTech Medical o su personal de servicio técnico autorizado.

Precauciones y posibles reacciones adversas

Uso de Tango M2

Utilice únicamente manguitos de presión arterial suministrados por SunTech Medical.

Observe atentamente al paciente durante el procedimiento. Verifique la compatibilidad de la presión con todos los pacientes. Si se produce alguna anomalía, ya sea en la unidad o en el paciente, suspenda el uso de forma inmediata y desconecte el manguito, el sensor del oxímetro y los electrodos (si los tuviera) del paciente.

La exactitud de cualquier lectura de la presión arterial o medición de saturación de oxígeno puede verse afectada por la posición del sujeto, su condición física y el uso que no cumpla con las instrucciones de uso detalladas en este manual. La interpretación de las mediciones de la presión arterial y la saturación de oxígeno debe ser realizada únicamente por un médico.

No se ha establecido la seguridad ni la efectividad de este dispositivo en embarazadas, niños menores de 13 años y neonatos.

Oximetría de pulso

Use únicamente los sensores de oxímetro de pulso (SpO_2) Nonin, suministrados por SunTech Medical.

Controle frecuentemente el lugar de colocación del sensor de SpO_2 para verificar la correcta posición del sensor y la circulación y sensibilidad cutánea del paciente.



Estos factores pueden afectar la exactitud de la oximetría de pulso:

- Interferencia electroquirúrgica.
- Catéteres arteriales, manguitos para medir la presión arterial, líneas de infusión, etc.
- Humedad en el sensor.
- Sensor mal colocado.
- Tipo de sensor incorrecto.
- Pulso imperceptible.
- Pulsaciones venosas.
- Anemia o concentraciones bajas de hemoglobina.
- Colorantes cardiovasculares.
- Sensor no situado a nivel del corazón.
- Uñas artificiales y esmaltes de uñas oscuros.

Posibles reacciones adversas

En el área del manguito de PA, el sensor de SpO₂ o los electrodos puede producirse exantema alérgico (erupción sintomática), incluida la formación de urticaria (reacción alérgica que incluye zonas de la piel y las membranas mucosas edematosas y protuberantes y picazón intensa), provocado por el material del manguito, el sensor o los electrodos.

Después de la colocación del manguito de PA, puede observarse formación de petequia (una diminuta macha rojiza o púrpura que contiene sangre y aparece en la piel) o fenómeno de Rumpel-Leede (petequias múltiples) en el brazo, que puede provocar trombocitopenia idiopática (disminución espontánea persistente en la cantidad de plaquetas, asociada con condiciones hemorrágicas) o flebitis (inflamación de una vena).

Precauciones

La ley federal de los EE.UU. establece que este dispositivo sólo puede ser vendido por un médico o por prescripción facultativa.

El monitor de PA no invasiva Tango M2 tiene protección contra desfibrilación. El oxímetro de pulso no cuenta con esa protección.

Advertencias y contraindicaciones



ADVERTENCIA: No está permitido modificar este equipo de ninguna manera.

Asegúrese de tener disponibles un equipo de resucitación y el personal adecuados en todo momento durante el procedimiento.

Todas las alarmas indican un posible aumento del riesgo de lesión si se sigue adelante con la prueba.

NO USE el monitor si no terminó la autoprueba de diagnóstico, o si muestra una presión superior a cero sin ningún manguito de PA colocado o un valor de saturación de oxígeno sin ningún sensor de SpO₂ colocado. Es posible que los valores mostrados por dicha unidad sean inexactos.

NO USAR en neonatos, niños ni pacientes que se sepa que son susceptibles a los hematomas.

NO COLOQUE el manguito de PA en una extremidad que se utilice para infusiones IV, dado que al inflar el manguito puede bloquear la infusión y hacerle daño al paciente.



ATENCIÓN: Se debe tener en cuenta que la interrupción de la circulación puede provocar lesiones dolorosas al PACIENTE por la continua presión del MANGUITO debida a que los tubos de las conexiones están retorcidos.



ADVERTENCIA: Se debe comprobar (por ejemplo, mediante la simple observación de la extremidad) que el funcionamiento del ESFIGMOMANÓMETRO AUTOMÁTICO no provoca un deterioro prolongado de la circulación sanguínea del paciente.

NO coloque el manguito de PA sobre una herida, ya que puede agravarla.



No coloque el manguito de PA sobre el brazo de un lado sometido a mastectomía total. En el caso de mastectomía doble, utilice el lado del brazo no dominante.

La interrupción de la circulación debida a mediciones de la PA demasiado frecuentes pueden provocar lesiones en el paciente.

La presurización del manguito de PA puede provocar que deje de funcionar momentáneamente cualquier otro equipo de monitorización colocado en la misma extremidad.

NO coloque el sensor de SpO₂ en la misma extremidad que el MANGUITO de PA o cualquier otro dispositivo que restrinja el riego sanguíneo. Se puede perder el monitoreo debido a la obstaculización de las mediciones del pulso.

NO USE el dispositivo en presencia de anestésicos inflamables, dado que podría provocar una explosión. El uso de este monitor en entornos enriquecidos con oxígeno no es adecuado.

Evite la comprimir o limitar los tubos del paciente, ya que esto podría influir en la lectura de la PA.

EXPOSICIÓN A LÍQUIDOS: NO sumerja el monitor en ningún líquido, no aplique líquidos sobre la superficie del monitor, ni intente limpiar la unidad con detergentes líquidos ni agentes limpiadores. Esto puede ocasionar un peligro eléctrico. Consulte las instrucciones de limpieza que figuran en la sección de limpieza de esta guía. Si se presenta alguna de estas situaciones, comuníquese con SunTech Medical. Protección contra la entrada de agua o partículas - Equipo ordinario (sin protección: IPX0).

NO permita que el sensor de SpO₂ se humedezca.

NO utilice un manguito de PA o un sensor de SpO₂ deteriorado.

NO quite las tapas de la unidad. Si lo hace, puede quedar expuesto a tensión peligrosa y sufrir una descarga eléctrica. El monitor no contiene ningún componente que pueda ser reparado por el usuario.

NO REALICE REPARACIONES USTED MISMO: ninguna persona debe realizar ni intentar realizar alguna reparación, a menos que haya recibido capacitación sobre la reparación a través de SunTech Medical o tenga profundos conocimientos acerca de la reparación y el uso de equipos automáticos de medición de la presión arterial. (El reemplazo de un componente por uno diferente al suministrado puede provocar errores en la medición).

NO coloque el monitor de modo que sea difícil de acceder a él y desconecte el enchufe de la toma de corriente. El enchufe del cable del monitor es el medio de desconexión del equipo de la red.

Para evitar el riesgo de choque eléctrico, este equipo solo debe conectarse a un enchufe con toma a tierra.

NO conecte el monitor a equipos que no cumplan con la norma IEC 60601-1. Al colocar el monitor a un paciente, los conectores RS-232 y USB solo se pueden conectar a equipos que cumplan con la norma IEC 60601-1.

Iconos, símbolos y abreviaturas

Iconos

Los siguientes iconos son utilizados en esta guía, en el equipo Tango M2 y en su embalaje y son exclusivos de SunTech Medical.



MODO DKA™ para la medida auscultatoria de la presión arterial (bajo esfuerzo).



MODO OSC para la medida oscilométrica de la presión arterial (en reposo).



Conexión del cable del paciente para el manguito de PA (neumático).



Conexión del cable del paciente del micrófono para los sonidos de K.



Mensaje de advertencia



Mensaje de atención

Símbolos

Los símbolos siguientes son símbolos convencionales que se utilizan en el equipo Tango M2 y en su embalaje.

	Sensor de SpO ₂ . Parte aplicada tipo BF.		Entrada ECG.
	Puerto de comunicación serial RS-232.		Entrada de CC de 9 V.
	Puerto BNC, disparador ECG externo.		Auriculares.
	USB-A o USB-B.		Protegido contra desfibrilador.
	Certificación ETL.		La fuente de alimentación contiene materiales peligrosos. Debe eliminarse de manera adecuada.
	Encendido/apagado.		Consulte la guía del usuario.
	Sin alarma de SpO ₂ .		Atención: consulte la documentación suministrada.
	Fabricante, fecha de fabricación.		Fecha de Fabricación
	Certificación internacional TÜV.		Toma a tierra.



Certificación TÜV Canadá y EE.UU.



Marca PSE: autorización japonesa para dispositivos médicos.



No contiene partes reparables, elimínese adecuadamente.



Cumple con EISA 2007, nivel V de eficiencia CEC UE (CE), N.º 278/2009 Fase II.



La temperatura de envío debe estar entre 20 °C y 65 °C.



La humedad del envío debe estar entre el 15% y el 90%.



Sello de garantía.



Componentes reconocidos certificados por UL según los requisitos para Canadá y EE.UU.



Configuración de conexiones de salida: voltaje positivo, pantalla negativa.



Solo para uso en interiores.



El producto cumple los requisitos de la Directiva RSP 2002/95/CE.



Frágil.



Marca CE: este producto cumple los requisitos de la Unión Europea.



Mantener seco el embalaje y su contenido.



Equipo de aislamiento de clase II.



Representante Autorizado Europeo



Abreviaturas utilizadas frecuentemente

PA	Presión arterial	PNI	Presión arterial no invasiva
LPM	Latidos por minuto	OSC	Oscilométrico
DKA™	Análisis dimensional de los sonidos de Korotkoff	SpO₂	Porcentaje de saturación de oxígeno de la sangre arterial (hemoglobina)
Sonidos de K	Sonidos de Korotkoff	USP	Uso para un solo paciente
PAM	Presión arterial media	SIS	PA sistólica
DIA	PA diastólica		

Configuración del Tango M2

El Tango M2 está diseñado para trabajar directamente con su sistema de prueba de esfuerzo. Cuando se conectan correctamente los dos dispositivos, el sistema de prueba de esfuerzo ordenará lecturas de la PA al monitor de manera automática durante la prueba de esfuerzo. El Tango M2 enviará al sistema de prueba de esfuerzo los datos de las mediciones de presión arterial, SpO₂ y pulso. Consulte la biblioteca electrónica correspondiente a su monitor Tango M2 para configurar correctamente el monitor al sistema de prueba de esfuerzo.

Gracias a su opción de ECG interno, el Tango M2 también puede utilizarse sin estar conectado a un sistema de prueba de esfuerzo.

Esta sección describe cómo ajustar el monitor a cada situación.

Desembalaje del monitor


Cuando desembale su Tango M2, compruebe que no falta ningún componente.

Consulte la hoja aparte que encontrará en la bandeja del interior del envase, en la que se especifica qué componentes se deben recibir, en función de las opciones que haya solicitado con su Tango M2.

Configuración del panel trasero

Todas las conexiones del Tango M2 se encuentran en la parte trasera del monitor.

- Conecte su sistema de prueba de esfuerzo al Tango M2 mediante el cable del ECG externo en el puerto BNC y el cable con conector RS-232. En lugar del cable RS-232, puede utilizar el cable USB si su Tango M2 venía con esta opción. Consulte las notas de las interfaces en la biblioteca electrónica del Tango M2 para aprender cómo se realiza correctamente el ajuste entre estos dos dispositivos.
- El cable del paciente y el cable ECG son “partes aplicadas de tipo BF y con protección contra desfibrilación” y el SpO₂ es una “parte aplicada de tipo BF”.
- Si su Tango M2 incluye la función de ECG interno, entonces también dispondrá de un conector ECG. Si no, el puerto ECG estará tapado.

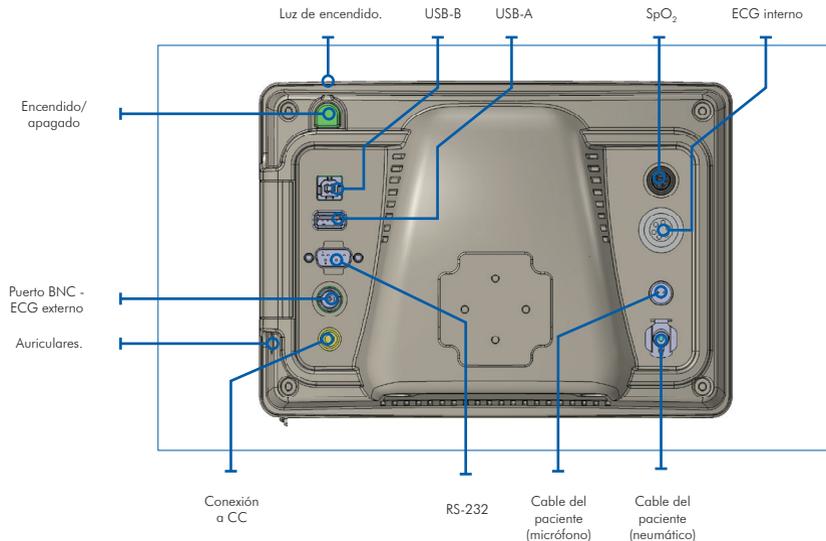



Con el sistema de prueba de esfuerzo

El Tango M2 se puede conectar a una gran variedad de sistemas de prueba de esfuerzo. El anexo A ofrece una lista de sistemas de prueba de esfuerzo compatibles.

La conexión del Tango M2 a un sistema de prueba de esfuerzo debe ser realizada por un técnico biomédico o una persona familiarizada con los equipos de medida de la presión arterial y los sistemas ECG de prueba de esfuerzo. Su representante comercial de SunTech Medical puede ayudarle con esta instalación.

Notas de las interfaces

SunTech Medical pone a su disposición notas de las interfaces de la mayoría de los sistemas de prueba de esfuerzo compatibles con el Tango M2. Las notas de las interfaces proporcionan instrucciones detalladas, con esquemas ilustrativos y una sección de preguntas frecuentes para conseguir un ajuste y funcionamiento adecuados.

Visite el sitio web de SunTech Medical www.SunTechMed.com para descargar las notas de las interfaces de cualquier sistema de prueba de esfuerzo compatible. Desde la pestaña "Support", navegue hasta: [Customer Technical Support > Download Library > Stress BP Monitors > Tango M2 > Interface Notes](#) donde encontrará una lista de las notas de las interfaces disponibles.

También puede consultar la biblioteca electrónica dentro de su Tango M2 para encontrar ayuda sobre de la instalación entre los dos dispositivos: En [Menú principal > Configuración del monitor > Biblioteca electrónica > Notas de la interfaz](#) encontrará una lista de notas de las interfaces disponibles.

AVISO: ¡Consulte las notas de la interfaz de su sistema de prueba de esfuerzo antes de proseguir la instalación!

Si su sistema de prueba de esfuerzo no se encuentra en la lista de la biblioteca electrónica, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de SunTech:

Correo electrónico CustomerService@SunTechMed.com

Teléfono EE.UU.: 800.421.8626 / 919.654.2300

Europa, África del Norte y Oriental: 44 (0) 1865.884.234

Asia y Pacífico 852.2251.1949



Fijación de las conexiones al monitor

Conecte la fuente de alimentación al cable de corriente y enchúfelo en una toma de CA. Conecte la fuente de alimentación al conector de entrada de CC.

Conecte el cable del paciente al micrófono y los conectores neumáticos a la parte trasera del monitor.

Siga las instrucciones de la nota sobre la interfaz para conectar el Tango M2 al sistema de prueba de esfuerzo.

Encienda el monitor Tango M2 con el interruptor de encendido/apagado de la parte trasera del monitor.

AVISO: La luz azul de la parte superior del Tango M2 estará encendida siempre que el monitor esté conectado a la corriente.

Pasados 30 segundos, el logotipo de SunTech Tango M2 aparecerá brevemente y después se mostrará la pantalla del menú principal (la vista predeterminada es la vista de medición).

Selección de la configuración del monitor y el sistema de prueba de esfuerzo

Siga las instrucciones de la nota sobre la interfaz para conectar el Tango M2 al sistema de prueba de esfuerzo.

Si tiene cualquier dificultad de comunicación con el sistema de prueba de esfuerzo, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de SunTech:

Correo electrónico CustomerService@SunTechMed.com

Teléfono **EE.UU.:** 800.421.8626 / 919.654.2300

Europa, África del Norte y Oriental: 44 (0) 1865.884.234

Asia y Pacífico 852.2251.1949

La instalación habrá terminado cuando haya seleccionado los ajustes del sistema de prueba de esfuerzo y del monitor.



Verificación de las conexiones

Verifique la combinación de los dispositivos realizando una lectura de la presión arterial para confirmar que el Tango M2 funciona correctamente con el sistema de prueba de esfuerzo. Siga las instrucciones de la sección "Uso del Tango M2 durante una prueba de esfuerzo" de esta guía (p. 29).

Sin un sistema de prueba de esfuerzo

El Tango M2 también puede utilizarse sin conectarlo a un sistema de prueba de esfuerzo.

AVISO: Si su Tango M2 incluye la opción de ECG interno, puede tomar tanto medidas de la presión arterial tanto auscultatorias como oscilométricas. Si su Tango M2 no incluye la opción de ECG interno, solo puede tomar medidas oscilométricas de la presión arterial.

La configuración debe ser realizada por un técnico biomédico formado o un proveedor autorizado de SunTech que esté familiarizado con los equipos de medida de la presión arterial y los sistemas ECG de prueba de esfuerzo.

Conecte la fuente de alimentación al cable de corriente y enchúfelo en una toma de CA. Conecte la fuente de alimentación al conector de entrada de CC.

Conecte el cable del paciente al micrófono y los conectores neumáticos a la parte trasera del monitor. Conecte el cable ECG al conector de ECG interno de la parte trasera del monitor.

Encienda el monitor Tango M2 con el interruptor de encendido/apagado de la parte trasera del monitor.

AVISO: La luz azul de la parte superior del Tango M2 estará encendida siempre que el monitor esté conectado a la corriente.

Pasados 30 segundos, el logotipo de SunTech Tango M2 aparecerá brevemente y después se mostrará la pantalla del menú principal (la vista predeterminada es la vista de medición).

Si utiliza el Tango M2 con el ECG interno, SunTech le recomienda ajustar un modo PERSONALIZADO del disparador ECG seleccionando: [Menú principal](#) > [Configuración del monitor](#) > [Sistema de estrés](#) > [Personalizado](#) > [Protocolo: SUNTECH](#) > [Estimulador ECG INTERNO](#)

Ahora el Tango M2 está listo para monitorizar la presión arterial sin estar conectado a un sistema de prueba de esfuerzo.


3. Presentación del Tango M2

El Tango M2 ofrece dos pantallas diferentes para ver las mediciones de los pacientes, que se pueden seleccionar como pantalla principal: vista de medición (predeterminada) y vista de gráfico.

Desde el menú principal puede cambiar la vista del monitor, ajustar el brillo, cambiar los ajustes de las medidas, establecer alarmas personales y ver los resultados de sus mediciones. A lo largo de esta guía se describen cada una de estas visualizaciones y funciones.


Panel frontal

El botón de encendido/apagado es azul y está situado por detrás, en la esquina superior derecha del monitor. Para utilizar el monitor deberá usar los seis botones del panel frontal. La luz azul de la parte superior del Tango M2 estará encendida siempre que el monitor esté conectado a la corriente.

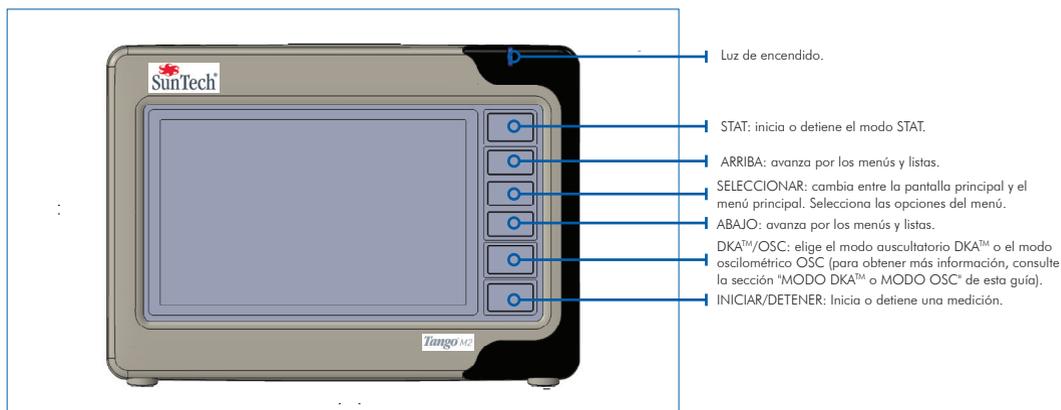

Vista de medición

La vista de medición muestra las mediciones actuales o las más recientes como valores digitales.

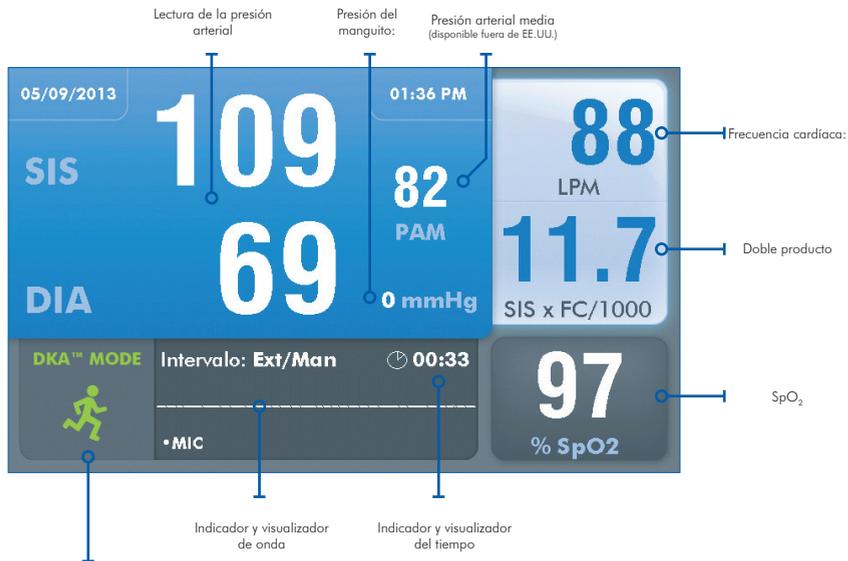

Un icono verde con un hombre corriendo indica que el monitor está preparado para tomar una medida auscultatoria (bajo esfuerzo) de la presión arterial (MODO DKA™).



Un icono naranja con un hombre corriendo tachado indica que el monitor está preparado para tomar una medida oscilométrica (en reposo) de la presión arterial (MODO OSC). El paciente debe permanecer quieto.

Consulte la sección de MODO DKA™ o MODO OSC de esta guía para obtener más información (p. 34).

Aviso sobre la vista de medición:

Lecturas completas de la PA o solo de la PA sistólica

- Si el monitor se ha ajustado para realizar solamente lecturas de la presión arterial sistólica, aparecerán lecturas en el campo SYS pero no así en el campo DIA.

Presión arterial media

- Si se desactiva la presión arterial media, el campo PAM quedará vacío y el icono desaparecerá. (Este es un ajuste predeterminado. La PAM no está disponible en los EE.UU.)

Frecuencia cardíaca

- Cuando se está tomando una lectura de la PA en el MODO DKA™, el parpadeo de un icono de un corazón indicará el rango sistólico/diastólico de la lectura (el rango en el que se detectan los sonidos de K).
- En el MODO OSC, la frecuencia cardíaca (FC) no se muestra hasta el final de la medición de PA.

SpO₂

- En el campo de SpO₂ aparecen guiones si el sensor de SpO₂ está conectado al monitor pero no al paciente.
- El campo de SpO₂ aparece en gris cuando no está conectado y en azul cuando sí lo está.
- Si no hay ningún sensor de SpO₂ conectado al monitor, el campo SpO₂ estará vacío.

Temporizador/intervalos


- El temporizador presenta los minutos y los segundos.
- Cuando el intervalo se muestra como "EXT/MAN", el monitor realizará mediciones de la PA solo cuando le llegue una orden, bien de un sistema de prueba de esfuerzo, bien pulsando un botón. El temporizador comenzará a contar desde el final de la última medida de PA. El icono del reloj está inactivado.
- Cuando aparezca un intervalo de tiempo, el monitor tomará medidas de la PA a intervalos regulares (también cuando le llegue una orden de un sistema de prueba de esfuerzo o pulsando un botón). El temporizador comenzará a contar desde el comienzo de la última medida de PA. El icono del reloj se activará para mostrar cuando comenzará la próxima lectura.
- Cuando se encuentra en el modo STAT, aparece el icono rojo de STAT. El temporizador comenzará a contar desde el final de la última medida de PA.

Visualización de onda

- La onda mostrará normalmente los sonidos de K recogidos por el micrófono del manguito. Se puede hacer que la onda muestre el canal ECG, pero volverá a mostrar los sonidos de K después de 60 segundos.

Vista de gráfico

La vista de gráfico consiste en un gráfico que resume las últimas medidas de la PA, además de mostrar los valores numéricos del resto de lecturas disponibles en la vista de medición.

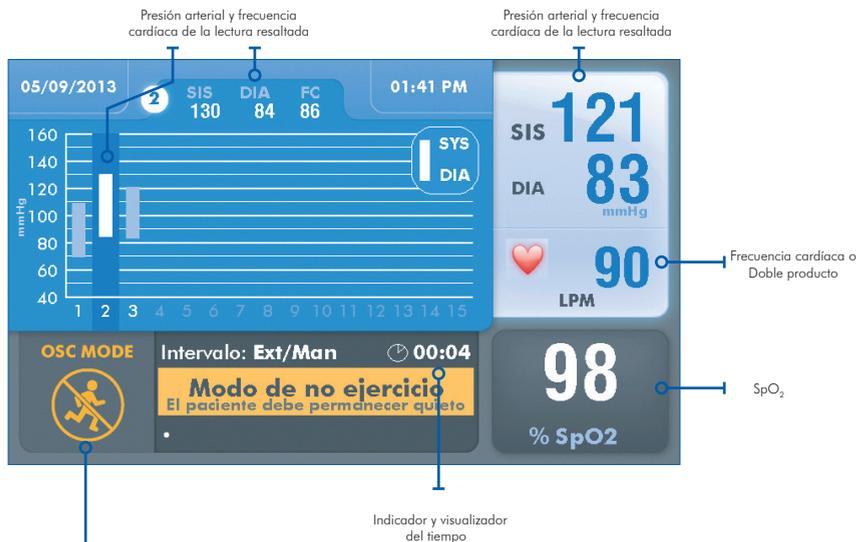

Un icono verde con un hombre corriendo indica que el monitor está preparado para tomar una medida auscultatoria (bajo esfuerzo) de la presión arterial (MODO DKA™).



Un icono naranja con un hombre corriendo tachado indica que el monitor está preparado para tomar una medida oscilométrica (en reposo) de la presión arterial (MODO OSC). El paciente debe permanecer quieto.

Consulte la sección de MODO DKA™ o MODO OSC de esta guía para obtener más información (p. 34).



Aviso sobre la vista de gráfico:

Gráfico de tendencia de la PA

- La vista de gráfico muestra hasta 15 lecturas de la PA al mismo tiempo, pero recuerda hasta 50 mediciones. Utilice los botones de ARRIBA y ABAJO para navegar por las últimas 50 mediciones.
- Las lecturas completas de la PA se representan con una barra y las sistólicas con un punto. Las mediciones con errores o mensajes de estado no se mostrarán en el gráfico.
- El número de secuencia, los valores de PA y de pulso de la lectura resaltada se muestran en la parte superior de la pantalla.

Lectura de PA / Presión del manguito

- La última lectura de la PA aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla.
- Mientras se está realizando una medición, la presión del manguito aparece en la parte superior derecha de la pantalla.

Frecuencia cardíaca/Doble producto

- De manera predeterminada se representa la frecuencia cardíaca, pero se puede cambiar para que muestre el doble producto.

Pantalla de SpO₂, Externa/Manual frente a los intervalos y la onda

- Consulte la sección Vista de medición

Para utilizar la vista de gráfico como la pantalla predeterminada, pulse SELECCIONAR para llegar al menú principal y utilice las teclas de arriba y abajo para navegar hasta: [Ver > Pantalla principal > Gráfico](#) y pulse la tecla SELECCIONAR para confirmarlo. A continuación pulse INICIAR/DETENER para volver a la pantalla principal (que ahora será la vista de gráfico).

Menú principal

Pulse el botón SELECCIONAR para ver la pantalla del menú principal.

Utilice este menú para configurar el monitor, establecer los ajustes de la pantalla y las mediciones, ver y exportar los resultados y consultar información de referencia.

Menú principal	
Config. el monitor	Sistema de estrés Personalizado
Config. la medición	└ Protocolo SunTech
Ver	└ Estimulador ECG Subida digital
Alarmas	Idioma: Español
Tabla de Medición	Fecha y hora
Finalizar prueba	Brillo: 70
Salir	Modo suspensión: Nunca
	Restablecer indicación de advertencia
	Biblioteca electrónica
	Información del sistema

- Utilice los botones ARRIBA y ABAJO para navegar por los menús de las pantallas o las listas de opciones.
- Utilice el botón SELECCIONAR para confirmar el submenú o elemento resaltado de la lista.

En cualquier menú, seleccione SALIR y presione SELECCIONAR para volver al menú anterior.

Pulse el botón INICIAR/DETENER para volver a la vista principal desde cualquier nivel del menú principal.

Las tablas siguientes indican las opciones de los menús, las selecciones posibles y las características predeterminadas.

Configuración del monitor

Opción del menú		Opciones (predeterminado)
Sistema de estrés (de prueba de esfuerzo)	Escoja una configuración preestablecida para su sistema de prueba de esfuerzo, o elija una personalizada:	Elija de una lista de configuraciones disponibles o elija "Personalizado".
	Si selecciona "PERSONALIZADO", seleccione el protocolo y el disparador ECG. Seleccione el protocolo:	Elija de una lista de protocolos disponibles o SunTech.
	Seleccione disparador:	Analógico Bajada digital Subida digital (predeterminado) Interno
Idioma*	Seleccione el idioma del monitor:	English (predeterminado) Francais Deutsch Italiano Español
Fecha y hora	Seleccione el formato de la fecha y hora actuales.	
	Elija el formato de fecha e introduzca la fecha:	MM/DD/AAAA DD.MM.AAAA DD MMM AAAA
	Elija el formato de hora e introduzca la hora:	12 h: El formato es "HH:MM AM/PM" (HH = 01-12; MM = 00-59) 24 h: El formato es "HH:MM AM/PM" (HH = 00-23; MM = 00-59)
Brillo	Gradúelo de 0 a 100. 0 es lo más oscuro y 100 lo más brillante.	70
Modo suspensión	Seleccione el tiempo a partir de la última actividad tras el cual el monitor entra en el modo inactivo.	Nunca (predeterminado) 10 min 30 min
Restablecer indicación de advertencia	Utilícelo para reiniciar el mensaje de advertencia del paso del MODO DKA al MODO OSC.	Sí/No

Opción del menú		Opciones (predeterminado)
Biblioteca electrónica	Seleccione la información que aparece en la pantalla del Tango M2	1. Notas de la interfaz 2. Tutoriales 3. Mensajes de estado
Información del sistema	Muestra la versión del firmware y el número de serie de la placa interna. Seleccione "Actualizar software" para realizar una actualización. Seleccione "Salir" para volver al menú de configuración del monitor.	Actualizar software/Salir
Salir	Selecciónelo para volver al menú principal.	

* Cuando haya seleccionado el idioma, el Tango M2 debe apagarse y encenderse para que los cambios surtan efecto.

Configuración de la medición

Opción del menú		Opciones (predeterminado)
Modo Medición	Seleccione el tipo de lectura de PA que quiera realizar: PA (tanto sistólica como diastólica) o SIS (solo sistólica; no disponible en el modo OSC).	PA/SIS
Intervalo	Seleccione el disparo externo/manual o un intervalo de tiempo para las lecturas automáticas. Los intervalos se expresan en min:seg.	EXT/MAN (predeterminado) 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 4:00 5:00 10:00 20:00
Inflado inicial	Fije una presión de inflado inicial para el manguito entre 120 mmHg y 280 mmHg, a intervalos de 10 mmHg.	180 mmHg

Opción del menú		Opciones (predeterminado)
Inflado máximo	Fije una presión de inflado máxima para el manguito entre 120 mmHg y 280 mmHg, a intervalos de 10 mmHg.	280 mmHg
Tasa de desinflado	<p>Seleccione la tasa de desinflado para el manguito. Automático = aproximadamente 4 mmHg/latido)</p> <p>Si la frecuencia cardíaca supera los 100 LPM, el monitor se desinflará más rápido de lo seleccionado.</p>	<p>Automático (predeterminado)</p> <p>3 mmHg/s</p> <p>4 mmHg/s</p> <p>5 mmHg/s</p> <p>6 mmHg/s</p> <p>7 mmHg/s</p> <p>8 mmHg/s</p>
Localizador	Seleccione si el monitor pitará durante una medición de la PA:	<p>Iniciar</p> <p>Finalizar</p> <p>Ambos</p> <p>Nunca</p>
Tecla "Stat Mode"	<p>Seleccione el tipo de lectura de PA que quiera realizar durante el modo STAT: PA (tanto sistólica como diastólica) o SIS (solo sistólica; no disponible en el modo OSC).</p>	PA (predeterminado) / SIS
Salir	Selecciónelo para volver al menú principal.	

Ver

Opción del menú		Opciones (predeterminado)
Pantalla principal	Seleccione qué vista quiere considerar como la pantalla principal:	Medición (predeterminado) / Gráfico
Visualización de onda	<p>Seleccione la señal del campo de visualización de onda:</p> <p>Si está seleccionado "ECG", se mostrará la señal durante 60 segundos, tras los cuales la visualización de onda volverá a mostrar los sonidos de K.</p>	Sonido K/ECG
Visualización de gráfico	Seleccione el valor que se muestra en la vista de gráfico, debajo de la lectura de PA:	FC (predeterminado) / DP
Purga de PA después de	<p>Seleccione el tiempo que ha de pasar para que una medición de PA desaparezca de la pantalla:</p> <p>(expresado en minutos)</p>	<p>Nunca</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>5 [minutos (predeterminado)]</p> <p>10</p>
Reducción de PA después de	<p>Seleccione el tiempo que ha de pasar para que una medición de PA aparezca en menor tamaño:</p> <p>(expresado en minutos)</p>	<p>Nunca</p> <p>1 [minutos (predeterminado)]</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>5</p> <p>10</p>
Nuevo paciente	<p>Seleccione la respuesta del monitor cuando la señal ECG se pierda durante 1 minuto:</p> <p>Si se selecciona "Auto", el monitor se reiniciará automáticamente cuando la señal ECG se pierda durante 1 minuto.</p> <p>Si se selecciona "Aviso", el monitor le preguntará "Nuevo paciente?" y esperará su confirmación antes de reiniciarse.</p>	Auto/Aviso (predeterminado)
Unidades de presión de PA	Seleccione las unidades para las lecturas de la PA:	mmHg (predeterminado)/kPa
Salir	Selecciónelo para volver al menú principal.	

Alarmas

Las alarmas del Tango M2 se pueden configurar para los siguientes parámetros.

Cuando se fija una alarma, si una lectura sobrepasa un determinado umbral, al final de la medición se escuchará una señal sonora consistente en 5 pitidos. La medición que ha causado la alarma aparecerá en amarillo.

Las alarmas relacionadas con normativas tendrán preferencia sobre las alarmas definidas por el usuario en caso de que las dos alarmas se activen al mismo tiempo. No obstante, los cinco pitidos correspondientes a la alarma serán los de la alarma definida por el usuario. Si es posible, el Tango M2 tratará de mostrar las dos alarmas, pero la alarma normativa será la alarma dominante en cualquier caso.

Opción del menú		Opciones (predeterminado)
SIS alta	Seleccione un umbral de presión sistólica por encima del cual activar la alarma. Las opciones son: 1) "DESCONECTAR", 2) para la presión sistólica en DKA de 50 mmHg a 270 mmHg o 3) para la presión sistólica en OSC de 50 mmHg a 260 mmHg, en incrementos de 10 mmHg.	Desconectar (predeterminado)
Caída SIS	Seleccione un umbral de presión sistólica por debajo del cual activar la alarma. Las opciones son: "DESCONECTAR" o una caída de 10 mmHg a 100 mmHg, en incrementos de 5 mmHg. Esta alarma se reinicia cuando se pasa a un nuevo paciente.	Desconectar (predeterminado)
DIA alta	Seleccione un umbral de presión diastólica por encima del cual activar la alarma. Las opciones son: "DESCONECTAR" o una caída de 20 mmHg a 160 mmHg, en incrementos de 10 mmHg.	Desconectar (predeterminado)
FC Alta	Seleccione un umbral de frecuencia cardíaca por encima del cual activar la alarma. Las opciones son: "DESCONECTAR" o una frecuencia cardíaca entre 40 lpm y 200 lpm en incrementos de 10 lpm.	Desconectar (predeterminado)
Salir	Selecciónelo para volver al menú principal.	

Tabla de medición

Opción del menú		Opciones (predeterminado)
	<p>En la tabla aparecen los datos de las 6 últimas mediciones realizadas:</p> <p># (ver nota al pie)</p> <p>Fecha.</p> <p>Hora.</p> <p>Lecturas de PA sistólica y diastólica.</p> <p>Frecuencia cardíaca:</p> <p>Presión arterial media</p> <p>Mensajes de estado (si procede)</p> <p>La tabla de mediciones refleja hasta 300 mediciones. Utilice las flechas para navegar por los datos.</p> <p>El campo “#” es el número secuencial de las mediciones, (grabará “NP” para la primera lectura de PA cada vez que se identifique un nuevo paciente).</p>	
Ver toda la tabla	<p>Seleccione esta opción para ver la tabla de mediciones a pantalla completa. Pulse SELECCIONAR para volver al menú principal.</p>	n/a
Descargar datos	<p>Seleccione esta opción para descargar los datos en una unidad USB conectada al USB-A.</p>	n/a
Salir	<p>Selecciónelo para volver al menú principal.</p> <p>Aparecerá el aviso “Borrar tabla de medición?”.</p> <p>Si elige “Sí”, los datos de la tabla se borrarán.</p> <p>Si elige “No”, los datos se guardarán.</p>	<p>Sí</p> <p>No</p>

La tabla de mediciones refleja hasta 300 mediciones de la PA individuales. Una vez que se llega a las 300 lecturas, las lecturas más antiguas se van sustituyendo por las más nuevas.

En el anexo D encontrará las instrucciones para descargar los datos de la tabla de mediciones en una unidad USB y convertirlos al formato de Excel.

Menú principal					
#	Fecha	Hora	SIS	DIA	FC
NP	09-May-13	13:35	109	69	10 Δ
2	09-May-13	13:37	Inflado	demasiad	
3	09-May-13	13:38	130	84	86
4	09-May-13	13:41	121	83	90
5	09-May-13	13:44	119	80	88
NP	09-May-13	13:46	118	81	88
Fin de los datos					
Ver todas las lecturas					
Descargar datos					
Salir					

Finalizar prueba

Utilice “Finalizar prueba” para borrar las lecturas de la pantalla y preparar el monitor para un nuevo paciente.

Opción del menú		Opciones (predeterminado)
	Aparecerá el aviso “Finalizar prueba?”. Si selecciona “Sí”, el monitor borrará todas las lecturas de la pantalla, preparará el monitor para un estudio nuevo y volverá al menú principal. Si selecciona “No”, el monitor guardará las lecturas y los ajustes y volverá al menú principal.	Sí (predeterminado)/ No

Uso del Tango M2 durante una prueba de esfuerzo

4.

Siga estos pasos para utilizar el Tango M2 conectado a un sistema de prueba esfuerzo.

1. Mida el brazo del paciente para estar seguro de elegir el tamaño manguito adecuado.
2. Coloque el manguito en el brazo del paciente.
3. Compruebe que el monitor recibe la señal ECG.
4. Realice las mediciones de la PA.
5. Finalice la prueba o prepare el sistema para el siguiente paciente.

Antes de utilizar el Tango M2 con su sistema de prueba de esfuerzo, debe estar familiarizado con la toma de lecturas de presión arterial y con la realización de pruebas de esfuerzo ECG.

Paso 1. Colocación del manguito de presión arterial

Utilice un manguito de presión arterial Orbit-K™ de SunTech o un kit de uso para un solo paciente de SunTech (compuesto por un manguito desechable y un fijador para el micrófono). Esta sección le proporciona las instrucciones para seleccionar el tamaño adecuado y colocar cualquier tipo de manguito.

AVISO: Es importante que el manguito esté bien colocado al brazo del paciente y que el micrófono esté colocado por encima de la arteria braquial (entre el bíceps y el tríceps). Si no se elige el tamaño adecuado o no se coloca bien el micrófono, es posible que no se puedan efectuar las lecturas o que sean imprecisas.


Manguito Orbit-K™

Hay cuatro tamaños de manguitos Orbit-K (para consultar los tamaños, vaya a la p. 48). Compruebe que el tamaño elegido es adecuado:

1. Separe la manga interna gris del manguito azul separando la banda de velcro.
2. Envuelva el brazo del paciente con el manguito.
3. Compruebe que la línea del extremo del manguito ("INDEX") se encuentra dentro de la palabra "RANGE" impresa en el manguito.
4. Si la línea del extremo del manguito ("INDEX") cae fuera de la palabra "RANGE", seleccione otro tamaño de manguito.

Esta sección le proporciona las instrucciones para seleccionar el tamaño adecuado y colocar cualquier tipo de manguito.

- a. Busque la arteria braquial, situada en el brazo, entre el bíceps y el tríceps. Es preferible utilizar el brazo izquierdo.
- b. Introduzca la manga del manguito en el brazo del paciente, con la parte que representa la arteria mirando hacia abajo.
- c. Debajo de la parte que representa la arteria hay un micrófono. Compruebe que el micrófono está colocado en la parte interna del brazo, justo por encima de la arteria braquial, entre el bíceps y el tríceps. Debe haber una distancia de 3 a 5 cm (unos dos dedos) entre el borde del manguito y el codo.
- d. Introduce el conector de 3 clavijas del micrófono del manguito en el conector correspondiente del cable del paciente. El conector se puede introducir orientado de cualquier manera.
- e. Conecte el tubo del manguito al conector correspondiente del cable del paciente y enrósquelo.
- f. Coloque el manguito alrededor del brazo y ajústelo. Use la muñequera para sujetar los cables al paciente.

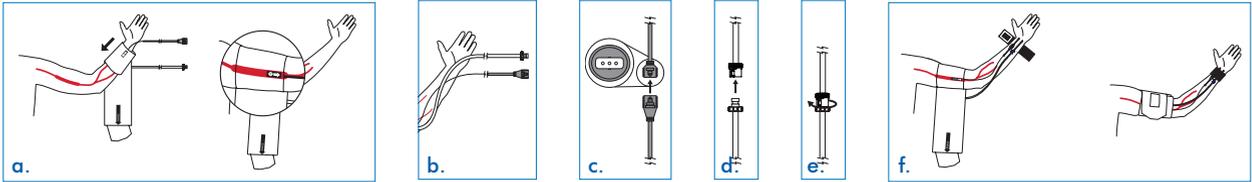

AVISO: Puede que le sea más fácil conectar el cable del paciente al manguito antes de colocar el manguito al paciente.

Manguito desechable

El kit de uso para un solo paciente de SunTech (USP) está disponible en cuatro tamaños. Cada kit USP está compuesto por un manguito y un fijador para el micrófono, ambos desechables. Utilice el micrófono del brazalete Orbit-K suministrado con el monitor. También puede pedir el micrófono de sonidos de K de 12 pulg., con la referencia 98-0235-01, creado para ser usado con los kits USP de SunTech Medical.

Para sacar el micrófono del manguito Orbit-K, abra la banda de velcro y saque con cuidado el micrófono de la funda. Limpie el micrófono antes de usarlo con un desinfectante suave de calidad médica (vea el apartado "Limpieza" de la sección 7).





Compruebe que el manguito es del tamaño correcto:

1. Envuelva el brazo del paciente con el manguito.
2. Compruebe que el ÍNDICE (el extremo del manguito) se encuentra dentro del RANGO (impreso en el manguito).
3. Si el ÍNDICE cae fuera del RANGO, seleccione otro tamaño de manguito.



ADVERTENCIA: Usar un manguito de tamaño incorrecto puede provocar mediciones imprecisas y confusas de la PA.

- a. Busque la arteria braquial, situada en el brazo, entre el bíceps y el tríceps.
Coloque el micrófono sobre el fijador del micrófono. Despegue la película protectora del fijador.
- b. Coloque el micrófono en el brazo del paciente comprobando que queda colocado en la parte medial del brazo, justo encima de la arteria braquial, entre el bíceps y el tríceps. Debe haber una distancia de 3 a 5 cm (unos dos dedos) entre el fijador del micrófono y el codo.
- c. Coloque el manguito alrededor del brazo y ajústelo.
- d. Introduce el conector de 3 clavijas del micrófono del manguito en el conector correspondiente del cable del paciente.
Los conectores se pueden introducir orientados de cualquier manera.
Conecte el tubo del manguito al conector correspondiente del cable del paciente y enrósquelo.
- e. Use la muñequera para sujetar los cables al paciente.

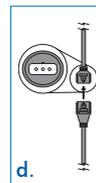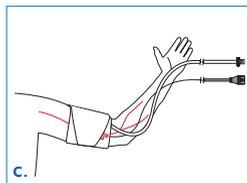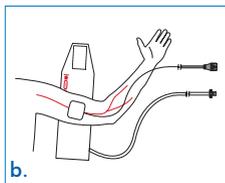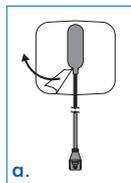

AVISO: Puede que le sea más fácil conectar el cable del paciente al manguito antes de colocar el manguito al paciente.

Paso 2. Confirmación de la señal ECG

El Tango M2 precisa una señal ECG para realizar mediciones de la PA durante una prueba de esfuerzo. Una vez colocadas las conexiones ECG del paciente, el monitor recibe la señal ECG del sistema de prueba de esfuerzo automáticamente.

AVISO: Antes de que comience la prueba de esfuerzo, el Tango M2 se puede utilizar en MODO OSC para realizar mediciones sin una señal ECG. El paciente debe permanecer quieto mientras se toman las medidas. Consulte la sección de MODO DKA™ o MODO OSC de esta guía para obtener más información.

Si no se han colocado las conexiones ECG del paciente, siga las instrucciones de su sistema de prueba de esfuerzo para colocar los electrodos ECG y las derivaciones.

Asegúrese de que el monitor Tango M2 muestra una frecuencia cardíaca estable.

Paso 3. Toma de lecturas de presión arterial

AVISO: El Tango M2 debe estar en modo DKA para tomar lecturas de PA cuando el paciente esté realizando ejercicio.



Una vez que comienza la prueba, el sistema de prueba de esfuerzo enviará órdenes al monitor para que tome lecturas de la PA. El manguito se inflará automáticamente para cada medida. Mientras dure la medición aparecerá el mensaje “Relajar el brazo, PA en curso” y, cuando haya finalizado, se mostrará la lectura. También puede pulsar el botón INICIAR/DETENER para realizar manualmente una medición de la PA. Este mismo botón puede ser utilizado para suspender una medida, si fuera necesario.

Visualización de las lecturas

Una vez terminada la lectura, la presión arterial y del doble producto se muestran a gran tamaño. Tras un minutos, estas lecturas se muestran a un tamaño menor. Después de cinco minutos, estas lecturas son sustituidas por rayas (estos tiempos son los valores predeterminados y pueden ajustarse con en [Menú principal > Ver](#)).

Lecturas a intervalos regulares

Con un sistema de prueba de esfuerzo


Cuando el Tango M2 está conectado a un sistema de prueba de esfuerzo, este dispositivo controlará los intervalos de medición de PA. El monitor seguirá un intervalo de medición de PA determinado por el sistema de prueba de esfuerzo. Bajo estas circunstancias no es necesario programar intervalos en el Tango M2.

Sin un sistema de prueba de esfuerzo

El Tango M2 puede configurarse para que tome lecturas de PA a intervalos de tiempo regulares de 1 a 20 minutos, seleccionando [Menú principal > Configuración de medición > Intervalo](#).

El intervalo de tiempo seleccionado aparecerá en la pantalla. El temporizador comenzará a contar desde el comienzo de la última medida. Cuando el temporizador alcance el intervalo fijado, se realizará la medición de la presión arterial.

Durante el intervalo de tiempo, el monitor seguirá respondiendo a las órdenes externas del sistema de prueba de esfuerzo o a las órdenes manuales mediante el botón INICIAR/DETENER. Cada orden manual o externa reiniciará el temporizador.

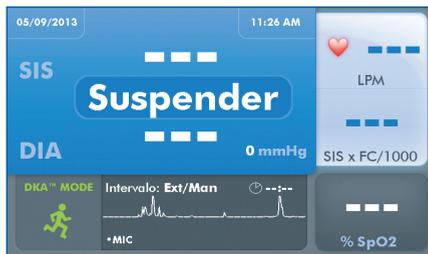

Detención de una lectura

Pulse el botón INICIAR/DETENER para detener una medición de presión arterial en curso. El manguito se desinflará, el monitor emitirá un pitido (salvo que se hayan desactivado los pitidos) y aparecerá brevemente el mensaje "CANCELAR" en la pantalla. El resultado de la lectura de la presión arterial solo mostrará rayas hasta la siguiente medición.



Modo STAT

Pulse el botón STAT *para tomar repetidamente medidas de la PA en situaciones de urgencia y emergencia.* El monitor tomará repetidamente medidas durante 10 minutos. El manguito se inflará automáticamente para cada medida. Un icono STAT rojo aparecerá en la pantalla y las lecturas de la presión arterial parpadearán mientras el monitor se encuentre en modo STAT. Para cancelar el modo STAT, pulse de nuevo el botón STAT o el botón INICIAR/DETENER. El modo STAT también se cancelará si recibe un mensaje de detención del sistema de prueba de esfuerzo. Todos los botones se inactivan en el modo STAT, salvo los botones STAT e INICIAR/DETENER.

El ajuste predeterminado del modo STAT consiste en tomar cada 10 segundos lecturas completas de la PA, es decir, con la presión sistólica y diastólica. Se puede configurar el monitor para que realice, por ejemplo, solo lecturas sistólicas cada 2 segundos en [Menú principal > Configuración de medición > Tecla "Stat Mode"](#).

- Las medidas completas (sistólicas y diastólicas) solo tardan 30 segundos en aparecer en la pantalla.
- Las medidas solamente sistólicas solo tardan 15 segundos.

Después de 10 minutos o cuando se cancela el modo STAT, el monitor volverá a la pantalla principal.


MODO DKA™ o MODO OSC

El MODO DKA™ utiliza la técnica auscultatoria para realizar las mediciones de la presión arterial.

El algoritmo DKA™ (Dimensional K-sound Analysis) patentado por SunTech Medical utiliza la señal ECG y el reconocimiento de patrones de sonidos de K para filtrar los ruidos, lo que hace que el MODO DKA™ sea muy resistente al movimiento del paciente. El MODO DKA™ precisa que el monitor reciba una señal ECG del paciente.

La alternativa es el MODO OSC, que realiza medidas oscilométricas de la presión arterial sin necesidad de señales ECG.

AVISO: El paciente debe permanecer quieto mientras se toman las medidas oscilométricas.

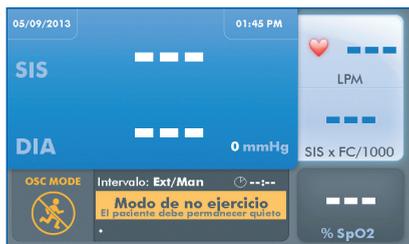

Pulse el botón DKA/OSC para elegir el modo oscilométrico. El icono de MODO OSC aparecerá acompañado del mensaje “MODO DE NO EJERCICIO/ El paciente debe permanecer quieto”. Existen otras diferencias en como se comporta el monitor en el MODO OSC:

Lecturas de la PA

- Las mediciones de la PA se muestran como lecturas completas (sistólica y diastólica) de la PA (el MODO OSC no permite lecturas de solo la PA sistólica).

Frecuencia cardíaca:

La frecuencia cardíaca (FC) no se muestra hasta el final de la medición de PA.

- El icono del corazón no parpadea.

Ajustes del menú principal

- La visualización de onda está inactiva.
- El único modo de medición PA posible en el modo Stat es el de lectura completa.
- Se utilizan valores estándar establecidos por normativas para el inflado máximo y la velocidad del desinflado.

Modo inactivo del monitor

El monitor entrará en modo inactivo si pasan 30 minutos sin comunicación entre el sistema de prueba de esfuerzo y el monitor (este es un valor predeterminado que puede ajustarse seleccionando [Menú principal > Configuración del monitor > Modo de suspensión después de](#)). Mientras el monitor permanezca inactivo, la pantalla se apagará pero la luz azul en la parte superior del monitor permanecerá encendida.

Cualquier comunicación proveniente del sistema de prueba de esfuerzo o la pulsación de un botón activarán el monitor.



Paso 4. Preparación para un paciente nuevo

Cuando la prueba de esfuerzo haya terminado, retire el manguito del paciente. Desconecte el manguito del cable del paciente.

AVISO: Si utiliza un manguito Orbit-K, limpie la manga por dentro y por fuera con un desinfectante suave de calidad médica. Si utiliza un kit USP, tire el manguito desechable y el fijador para el micrófono. Limpie el micrófono con un desinfectante suave de calidad médica y guárdelo para próximas pruebas (consulte la sección 7).

El monitor se reiniciará de manera automática para recibir un paciente nuevo cuando se haya perdido la señal ECG durante más de un minuto (es decir, cuando se hayan retirado las derivaciones ECG del paciente). Toda la información del paciente desaparecerá de la pantalla.

En lugar de reiniciar de manera automática, se puede ajustar el Tango M2 para que le pregunte "Nuevo paciente?" cuando se pierda la señal ECG, seleccionando [Menú principal > Ver > Nuevo paciente](#).

También puede reiniciar manualmente el monitor para utilizarlo en un paciente nuevo mediante [Menú principal > Finalizar prueba](#).

Consejos para realizar una prueba de esfuerzo

A continuación le ofrecemos unas sugerencias para realizar mediciones de la PA durante una prueba de esfuerzo.

Mediciones de prueba

Tome varias lecturas de prueba antes de comenzar la prueba de esfuerzo.

- Realice una o dos mediciones de la presión arterial con el paciente sentado o quieto en el modo DKA. Esto creará una PA inicial.
- A medida que vaya tomando las lecturas, observe la presión del manguito y los sonidos de K. Debe observar los sonidos de K como los escucharía si estuviera tomando la presión arterial de forma manual con un estetoscopio.

Cuando consiga una presión arterial inicial estable, comience la prueba de esfuerzo. Si tiene algún problema, encontrará más consejos en la sección "Mensajes de estado y alarmas" de esta guía.



Compruebe que el brazo del paciente está relajado

Trate de limitar el movimiento del brazo con el manguito durante la medición. Un pequeño balanceo se puede aceptar, no así flexionar el codo.

Evite la flexión de los músculos del brazo que lleva el manguito.

Si el paciente está sujetándose a la barra de la cinta sin fin para apoyarse, pídale que descanse el brazo con el manguito sobre la barra de la cinta con la palma hacia arriba. Otra opción es que el paciente deje suelto el brazo con el manguito a uno de sus lados durante la lectura. Si el paciente tiene que agarrar la barra para apoyarse, aconséjele que la agarre lo más suavemente posible. Si se agarra fuerte a la barra, puede aumentar el ruido que registra el micrófono de los sonidos de K debido a la flexión del músculo del brazo del paciente.

Medición más rigurosa de la presión arterial

Si el estado de su paciente se vuelve inestable y necesita monitorizar la presión arterial de manera más rigurosa, puede acceder al modo STAT pulsando el botón STAT.

Para cancelar el modo STAT, pulse de nuevo el botón STAT o el botón INICIAR/DETENER.

Este atento a los mensajes de estado y alarmas

En la sección "Mensajes de estado y alarmas" de esta guía hay una completa descripción de los mensajes de estado y alarmas del Tango M2.

Uso del Tango M2 sin un sistema de prueba de esfuerzo

5.

Siga estas instrucciones para utilizar el Tango M2 con opción de ECG interno cuando no está conectado a un sistema de prueba de esfuerzo:

1. Mida el brazo del paciente para estar seguro de elegir el tamaño manguito adecuado.
2. Coloque el manguito en el brazo del paciente.
3. Prepare las conexiones ECG del paciente.
4. Realice las mediciones de la PA.
5. Finalice el estudio o prepare el sistema para el siguiente paciente.

Antes de usar el Tango M2 debe estar familiarizado con la toma de lecturas de presión arterial.

38

Paso 1. Colocación del manguito de presión arterial

Utilice un manguito de presión arterial Orbit-K™ de SunTech o un kit de uso para un solo paciente de SunTech (compuesto por un manguito desechable y un fijador para el micrófono).


AVISO: Es importante que el manguito esté bien colocado al brazo del paciente y que el micrófono esté colocado por encima de la arteria braquial, en la parte interior del brazo, entre el bíceps y el tríceps.

Consulte el paso 1 "Colocación del manguito de presión arterial" en la sección anterior de esta guía para seleccionar el tamaño adecuado y colocar cualquier tipo de manguito.

Paso 2. Conexiones ECG del paciente

Prepare y conecte 3 derivaciones ECG: RL (N), V2 (C2) y V6 (C6).

- Coloque los electrodos en zonas cercanas a algún hueso, no en una gran masa muscular.
- Prepare la piel de cada electrodo afeitando cualquier exceso de vello. Limpie bien con alcohol los lugares de colocación de las derivaciones.
- Para obtener los mejores resultados posibles, la medida de la impedancia con un impedómetro para piel debe ser inferior a 5 kΩ.

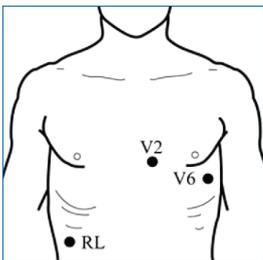

Conecte el cable ECG a los electrodos de la siguiente manera:

- La derivación verde (negro) a RL (N).
- La derivación amarilla a V2 (C2).
- La derivación violeta a V6 (C6)

Asegúrese de que el monitor Tango M2 muestra una frecuencia cardíaca estable.

Paso 3. Toma de lecturas de presión arterial

Pulse el botón INICIAR/DETENER para realizar manualmente una medición de la PA. Consulte el apartado de toma de lecturas de presión arterial de la sección anterior para obtener información sobre otras funciones del Tango M2:

- Lecturas a intervalos regulares
- Detención de una lectura
- Modo STAT
- MODO DKA™ o MODO OSC
- Modo inactivo del monitor

Paso 4. Preparación para un paciente nuevo

Cuando haya terminado las mediciones de la presión arterial, retire el manguito y los electrodos ECG del paciente. Desconecte el manguito del cable del paciente.

AVISO: Si utiliza un manguito Orbit-K, limpie la manga por dentro y por fuera con un desinfectante suave de calidad médica. Si utiliza un kit USP, tire el manguito desechable y el fijador para el micrófono. Limpie el micrófono con un desinfectante suave de calidad médica y guárdelo para próximas pruebas.

Consulte el paso 4 Preparación para un paciente nuevo de la sección anterior de esta guía para obtener información sobre cómo reiniciar el monitor.

Uso de las opciones del Tango M2

6.

Oxímetro de pulso (SpO₂)

El sensor opcional SpO₂ le permite medir la saturación de oxígeno de la sangre arterial y visualizarla en la pantalla del Tango M2. Si su Tango M2 no dispone de la opción SpO₂ (ref. 98-0233-01), puede enviar un pedido de esta opción a su representante de SunTech Medical (vea la página 69).

Conecte el cable del sensor de SpO₂ en el conector correspondiente del monitor.

AVISO: Utilice el sensor de SpO₂ en el brazo que no lleva el manguito.

AVISO: Si el sensor no se ubica correctamente, la luz puede desviarse y no pasar por el tejido, con lo cual se producen inexactitudes en la oximetría de pulso. La correcta colocación del sensor es fundamental para el buen funcionamiento.

- a. Coloque un dedo (preferentemente el dedo índice, corazón o anular) dentro del sensor de SpO₂ hasta que la punta del dedo alcance el tope del sensor digital. No introduzca el pulgar.
- b. La uña del dedo debe quedar mirando hacia la parte superior del sensor. Si la uña es larga, asegúrese de que no interfiera con la correcta posición del dedo.

AVISO: algunos colores de esmalte de uñas (en particular los tonos oscuros) o las uñas postizas pueden reducir las transmisiones de luz y afectar la exactitud de la oximetría de pulso. Retire el esmalte de uñas o las uñas postizas antes de usar el sensor de SpO₂.

- c. Utilice cinta adhesiva alrededor del dedo para fijar el cable del sensor durante la prueba de esfuerzo. Asegúrese de que la cinta adhesiva que sujeta el cable no restrinja la circulación.



AVISO: La sensibilidad de la piel del paciente a la cinta adhesiva puede variar en función del estado de la piel. Retire las cintas adhesivas si el paciente experimenta una reacción alérgica al material adhesivo.

En unos segundos aparecerá una lectura de la SpO₂. Las medidas de SpO₂ se suceden cada 1/3 segundos y el valor que se muestra se actualiza cada segundo. La lectura que se muestra es una media de SpO₂ de 4 latidos. Cualquier pérdida transitoria de la señal afectará la precisión de esta lectura dado que se realiza una media.

No se pueden establecer alarmas con el SpO₂. No se mostrará ninguna lectura de SpO₂ en las siguientes circunstancias: pérdida o debilidad de la señal o interrupción del circuito debida al deterioro de algún cable. El Tango M2 se apagará si el voltaje del cable hace corto con la toma a tierra hasta que se repare la avería. Si hay algún cable deteriorado, retire el cable de SpO₂ del Tango M2 y siga utilizando el Tango M2 con normalidad. Llame al servicio de atención al cliente de SunTech para obtener ayuda si hay algún cable de SpO₂ deteriorado.

Kit de auriculares

Los auriculares le permiten escuchar los sonidos de K captados por el micrófono del manguito. Estos sonidos son similares a los que escucha cuando mide la PA de forma manual.

Conecte la clavija de los auriculares al conector de la parte derecha del monitor.

AVISO: Los auriculares solo se deben utilizar con fines de evaluación o referencia, no como herramienta diagnóstica.

7.

Cuidado del Tango M2

Limpieza

Monitor



ATENCIÓN: El monitor Tango M2 no es esterilizable. No sumerja el monitor en ningún líquido ni intente limpiarlo con detergente líquido, agente de limpieza ni solvente.

Humedezca un paño delicado con un desinfectante suave de calidad médica y quite el polvo y la suciedad de la superficie del monitor.

Manguito Orbit-K™

AVISO: Después de cada prueba de esfuerzo se debe limpiar el manguito y el cable del paciente.

Retire regularmente la cámara inflable y el micrófono para limpiarlos. Humedezca un paño delicado con un desinfectante suave de calidad médica, limpie la cámara inflable y el micrófono y déjelos secar al aire. Limpie la manga por dentro y por fuera con un desinfectante suave de calidad médica. Cuando se haya usado muchas veces, se recomienda lavar el forro del manguito a máquina en agua fría con un desinfectante suave. Déjelo secar al aire. El secado a máquina puede dañar el tejido del forro del manguito Orbit-K.

Se debe volver a introducir la cámara inflable en el manguito de manera que el tubo del aire quede por fuera de la manga. Tenga en cuenta que la conexión del tubo neumático debe estar orientada hacia abajo cuando utilice el manguito, tanto en el brazo derecho como en el izquierdo.



ATENCIÓN: No lave a máquina la cámara inflable ni el micrófono.

Cable del paciente y cable ECG



ATENCIÓN: No sumerja el cable ni las conexiones en ningún líquido.

Para limpiarlos, utilice un paño delicado y una mezcla de agua y un jabón suave. Elimine los residuos y seque.

Para la desinfección utilice un desinfectante de uso hospitalario como: cloro 1:10, Lysol®, glutaraldehído al 2% o Wescodyne®.

AVISO: Siga el protocolo establecido en su centro para evitar las infecciones (Para la limpieza, siga el protocolo establecido en su centro).

Sensor de SpO₂.



ATENCIÓN: Nunca sumerja bajo ningún líquido los sensores ni los clips. No vierta ni rocíe ningún líquido sobre el sensor. Los limpiadores cáusticos o abrasivos provocarán daños permanentemente. No abra la caja del sensor de dedo tipo clip más de 45° porque podría resultar dañada.

Limpie el sensor con un paño delicado humedecido con un desinfectante suave de calidad médica o alcohol isopropílico. Retire cualquier resto de cinta adhesiva. Deje que el sensor se seque bien antes de volver a utilizarlo.

Mantenimiento preventivo

Autocomprobaciones del sistema

El monitor Tango M2 realiza una serie de controles del sistema y del software normalmente. Si se detecta algún problema, aparecerá un código de error con un mensaje para ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de SunTech.



ADVERTENCIA: NO utilice el monitor si cuando el manguito no está colocado, muestra un valor de presión que no sea cero.

Piezas de repuesto

Periódicamente debe vigilar que el monitor, manguito, sensor de SpO_2 , cables y tubos no estén agrietados, deshilachados o rizados. Sustituya cualquier pieza deteriorada. Consulte la lista de accesorios y piezas de repuesto de esta guía (p. 48).



ATENCIÓN: El monitor no incluye ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario, y debe ser abierto, únicamente, por un representante de reparaciones autorizado. NO retire las tapas ni rompa el sello de garantía, dado que esto anulará la garantía del fabricante.

Manguito Orbit-K

Se recomienda cambiar cada año de el manguito Orbit-K, el micrófono y el cable del paciente para mantener la precisión de las medidas.

Si el manguito no precisa ser repuesto, puede cambiar solamente el micrófono. Para sacar el micrófono del manguito, abra la banda de velcro y saque con cuidado el micrófono de la funda.

Sensor de SpO_2

Puede retirar el sensor de SpO_2 desconectándolo del monitor Tango y sustituirlo con un nuevo sensor de SpO_2 de Nonin.

Calibración habitual

Compruebe cada año que el Tango M2 esté bien calibrado midiendo la exactitud de los transductores y los indicadores de presión.



ATENCIÓN: La calibración debe ser realizada por un técnico biomédico o por otra persona familiarizada con el monitor Tango M2.

Póngase en contacto con SunTech Medical para obtener las instrucciones para acceder a “Verificar calibración”. Las instrucciones también las puede obtener del manual de servicio técnico del Tango M2 (ref. 27-0139-A1 de SunTech).

Para los clientes de América:

SunTech Medical, Inc.
Departamento de reparaciones
507 Airport Boulevard, Suite 117
Morrisville, NC 27560 EE.UU.

Tel: 800.421.8626

919.654.2300

Fax: 919.654.2301

Para los clientes de Europa, Oriente Medio, África, Asia y el Pacífico:

SunTech Medical, Ltd.
Departamento de reparaciones
Oakfield Industrial Estate
Eynsham, Oxfordshire OX29 4TS Reino Unido

Tel: 44 (0) 1865.884.234

Fax: 44 (0) 1865.884.235

EC	REP
----	-----



Equipo necesario:

- Esfigmomanómetro electrónico calibrado o equivalente.
- Manguito de 500 ml o manguito de adultos Orbit-K ajustado alrededor de algo que no se rompa ni quiebre (como ocurriría con el vidrio).
- Pera de inflado manual con válvula de purga.
- Tubo, piezas en T y diversos conectores, o puede solicitar el kit de tubos en T (ref. 98-0030-00 de SunTech).

Procedimiento:

Cuando acceda a "Verificar calibración", el monitor cerrará sus válvulas de purga y mostrará en la pantalla la presión aplicada al conector del tubo del paciente.

Verifique la calibración del Tango M2 inflando manualmente y evaluando la presión del esfigmomanómetro en comparación con la lectura de presión de la pantalla del dispositivo. La presión indicada en pantalla debe estar dentro de los ± 2 mmHg con respecto al valor del esfigmomanómetro de mercurio, con un rango de presiones entre 0 y 300 mmHg. En caso contrario, póngase en contacto con SunTech Medical para consultar el tema de la calibración.

Una vez finalizada la calibración, pulse la tecla SELECCIONAR para salir de la pantalla de calibración.

Actualizaciones del software

Si hay alguna actualización del software del Tango M2 a su disposición, puede actualizarlo de manera muy sencilla desde el puerto USB-A.

Únicamente personal formado y familiarizado con el funcionamiento del Tango M2 debería instalar las actualizaciones de software. Si necesita ayuda, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de SunTech Medical.

Descargue las actualizaciones del software desde el sitio web de SunTech Medical (www.SunTechMed.com) en una unidad USB.

Introduzca la unidad USB en el puerto USB-A de la parte trasera del monitor.

Seleccione [Menú principal](#) > [Configuración del monitor](#) > [Información del sistema](#) > [Actualizar el software](#).

Para llevar a cabo la actualización, siga los mensajes de la pantalla.

Mensaje	Significado	Acción
Actualización en curso	En proceso de actualización.	
Actualización completada	Se ha instalado el nuevo software.	Si el mensaje dice “El Tango M2 va a reiniciarse”, seleccione “OK” para terminar el proceso de actualización.
No se ha encontrado ninguna unidad Flash	El Tango M2 no ha detectado ninguna unidad USB.	Espere unos momentos y vuelva a intentarlo. Si a pesar de todo no detecta la unidad, retírela y vuelva a introducirla. Espere unos instantes para que el Tango M2 reconozca la unidad.
No se ha encontrado una versión más reciente	No se ha realizado ninguna actualización.	Seleccione “Salir”

47

Eliminación

El monitor contiene una batería de litio. Devuelva el Tango M2 a SunTech Medical para su eliminación. Póngase en contacto para obtener una etiqueta de devolución con los gastos pagados.



ADVERTENCIA: Fuego, explosión y riesgo de quemaduras graves. El dispositivo contiene una batería de litio que debe eliminarse adecuadamente o ser devuelta a SunTech Medical para que se encargue de su eliminación.

Accesorios y piezas de repuesto

8.

Póngase en contacto con su representante comercial de SunTech Medical para pedir los siguientes elementos:

Descripción	Número de pieza	Datos adicionales
Manguitos Orbit-K™ y micrófonos de sonidos de K: Los paquetes de <i>Orbit-K</i> incluyen un micrófono de sonidos K (ref. 98-0235-00).		
Adulto pequeño	98-0062-21	18 – 27 cm
Adulto	98-0062-22	25 - 35 cm
Adulto Plus	98-0062-25	27 – 40 cm
Adulto grande	98-0062-23	32 – 44 cm
Micrófono de sonidos de K de 18 pulg.	98-0235-00	
Kits de uso para un solo paciente: Los kit USP vienen en paquetes de 20 kits por caja (no se incluye micrófono).		
Kit USP de adulto pequeño	98-0700-01	17 – 25 cm
Kit USP de adulto	98-0700-02	23 – 33 cm
Kit USP de adulto largo	98-0700-03	23 – 33 cm
Kit USP de adulto grande	98-0700-04	31 – 40 cm
Kit USP de adulto grande largo	98-0700-05	31 – 40 cm
Micrófono de sonidos de K de 12 pulg.	98-0235-01	

Descripción	Número de pieza	Datos adicionales
Cables y accesorios del Tango M2		
Fuente de alimentación	19-0012-01	
Cable del paciente, 4,5 m	91-0127-01	
Cable ECG del paciente	91-0004-00	Solo para el Tango M2 con ECG interno
Kit de SpO ₂ Xpod® Con sensor de dedo de adulto	98-0233-01	Incluye Xpod® y sensor de dedo de adulto
Oxímetro de pulso Xpod®	52-0003-00	
Sensor de dedo Purelight®	91-0125-01	Solo el sensor
Abrazadera de riel/poste con tornillos	36-0001-01	
Muñequera	98-0003-00	
Kit de tubos en T	98-0030-00	Para pruebas de calibración
Auriculares	51-0000-00	
Cable alargador de auriculares	91-0076-00	
Documentación y garantías extendidas		
Manual de servicio técnico	27-0139-A1	
CD del usuario	27-0135-A1	
Garantía adicional de un año	83-0018-00	Garantía extendida de 1 año
Garantía extendida de 3 años	83-0019-00	Garantía extendida (3 años, comprada de una vez)

El anexo B. contiene una lista de los cables a su disposición en SunTech Medical para conectar el Tango M2 a varios sistemas de prueba de esfuerzo.

9.

Mensajes de estado y alarmas



Mensajes de estado

Si el Tango M2 tiene algún problema tomando una lectura de la presión arterial, emitirá una alarma sonora consistente en 3 pitidos y aparecerá un mensaje de estado en la pantalla. Siga las instrucciones de la pantalla o las recomendaciones de la siguiente tabla.

AVISO: Las mediciones de presión arterial que hayan activado un mensaje de estado no aparecerán en el modo gráfico.

Pulse cualquier botón para borrar el mensaje de estado.

Los mensajes de estado también se borrarán si se inicia una medición de la presión arterial, tanto por una orden externa del sistema de prueba de esfuerzo, como por una orden dictada por un intervalo de tiempo.

Mensaje de estado	Causa	Solución
Mostradas tanto en el MODO DKA™ como en el MODO OSC.		
Pérdida de aire: Compruebe las conexiones de cables del manguito y de Tango M2.	El monitor interrumpirá una lectura de PA si no se alcanza la presión de inflado establecida en menos de 60 segundos.	Asegúrese de que ni el manguito ni el cable del paciente presenten fugas. Asegúrese de que el cable está correctamente conectado al monitor.

Mensaje de estado	Causa	Solución
<p>Exceso de presión del manguito: Compruebe que los cables del paciente no estén retorcidos. Deje caer el brazo a un lado y relájelo.</p>	<p>El monitor interrumpirá una lectura de PA si se ha alcanzado una presión excesivamente alta en el tubo del aire o en el manguito. No se ha registrado ninguna PA.</p>	<p>Pídale al paciente que deje caer el brazo sobre el costado y que lo relaje durante la lectura de PA (evitando una excesiva flexión del brazo). Asegúrese de que el cable no esté doblado o bloqueado.</p>
<p>Se requiere asistencia Llame a Sun Tech: EE.UU.: 1.800.421.8626 EMEA: +44 (0) 1865.884.234 APAC: +852.2251.1949</p>	<p>Indica que el monitor tiene un fallo en el sistema.</p>	<p>Póngase en contacto con el personal del servicio técnico más próximo o con un representante autorizado del servicio técnico. Se debe enviar el monitor a SunTech Medical para repararlo.</p>
<p>Medición retrasada: Para mantener la seguridad del paciente, esta medición se ha retrasado. La próxima lectura se producirá según lo previsto.</p>	<p>Indica que la medición se retrasó por razones de seguridad.</p>	<p>La próxima lectura de la PA se producirá según lo previsto.</p>
<p>Repetir PA: Deje caer el brazo a un lado y repita la PA.</p>	<p>El monitor no logró obtener la lectura de la PA.</p>	<p>Comience una nueva lectura de PA a través del sistema de prueba de esfuerzo o mediante el botón INICIAR/DETENER del Tango M2. Pídale al paciente que deje caer el brazo sobre el costado y que lo relaje durante la lectura de PA (evitando una excesiva flexión del brazo).</p>
<p>Manguera bloqueada: Asegúrese de que la manguera del paciente no presente grandes dobleces o pellizcos.</p>	<p>Bloqueo de la manguera neumática.</p>	<p>Asegúrese de que la manguera del paciente no presente grandes dobleces o pellizcos.</p>

Mensaje de estado	Causa	Solución
Mostradas solo en el MODO DKA™.		
Demasiado movimiento de brazos	Demasiado ruido o movimiento de los brazos.	Pídale al paciente que deje caer el brazo sobre un costado, que reduzca la flexión del brazo y que relaje sus músculos.
Comprobar ECG	La señal ECG es débil, irregular o falta durante más de 3 segundos. No se ha registrado ninguna PA.	<p>Elija ECG como la visualización de onda para comprobar si el monitor está recibiendo la señal ECG. (Menú principal > Ver > Visualización de onda).</p> <p>Si existe una señal de FC/ECG: Pulse INICIAR/DETENER para tomar otra lectura. Si el error se repite, el paciente puede tener problemas ECG que impidan que el Tango M2 lea su presión arterial en el modo DKA.</p> <p>Si no existe señal de ECG: Asegúrese de que las derivaciones ECG están bien conectadas con el panel trasero. Asegúrese de que se ha preparado bien la piel del paciente y que se han colocado bien los electrodos. Revise las notas de la interfaz relativas a su sistema de prueba de esfuerzo. Asegúrese de que ha seleccionado el sistema de prueba de esfuerzo correcto (si ha elegido “Personalizado”, asegúrese de que ha seleccionado el estimulador ECG correcto).</p>

Mensaje de estado	Causa	Solución
Mostradas solo en el MODO DKA™.		
<p>Comprobar micrófono: Compruebe la posición y la conexión de cables del micrófono (Mic).</p>	<p>Sonidos K débiles, ausentes o no detectados. No se ha registrado ninguna PA.</p>	<p>Asegúrese de que el micrófono está colocado sobre la arteria radial. Asegúrese de que el manguito está bien conectado con el cable del paciente. Asegúrese de que el cable del paciente está bien conectado con el panel trasero. Compruebe el micrófono. Si está doblado o el cable no está bien conectado, sustituya el micrófono. Compruebe el micrófono dando golpecitos en el manguito y verificando la señal en el indicador de onda. Si la señal es plana, cambie el micrófono. Cambie el micrófono y el manguito cada año. Revise las notas de la interfaz relativas a su sistema de prueba de esfuerzo. Asegúrese de que ha seleccionado el sistema de prueba de esfuerzo correcto (si ha elegido "Personalizado", asegúrese de que ha seleccionado el estimulador ECG correcto).</p>

Mensaje de estado	Causa	Solución
Mostradas solo en el MODO DKA™.		
<p>No se ha detectado ECG. No se recibe señal de ECG. Compruebe que las derivaciones y cables están bien conectados.</p>	<p>El monitor no recibe señales de ECG.</p>	<p>Revise las notas de la interfaz relativas a su sistema de prueba de esfuerzo. Asegúrese de que ha seleccionado el sistema de prueba de esfuerzo correcto. (si ha elegido "Personalizado", asegúrese de que ha seleccionado el estimulador ECG correcto). Si está usando la opción de ECG interno, asegúrese de que el estimulador ECG personalizado esté establecido como INTERNO. Asegúrese de que los cables estén correctamente acoplados a sus conectores y que no muestren signos de deterioro. Elija ECG como la visualización de onda para comprobar si el monitor está recibiendo la señal ECG. (Menú principal > Ver > Visualización de onda).</p>
<p>Inflado demasiado bajo</p>	<p>Se han detectado sonidos K en una presión de objetivo de inflado del manguito de 10 mmHg. No se ha registrado ninguna PA.</p>	<p>La lectura de la PA puede ser inexacta. Compruebe la configuración de inflado inicial y máximo. Pídale al paciente que deje caer el brazo sobre el costado y que lo relaje durante la lectura de PA (evitando una excesiva flexión o movimiento del brazo). Tome otra lectura de la PA.</p>

Mensaje de estado	Causa	Solución
Mostradas solo en el MODO OSC.		
Demasiado movimiento de brazos: Si el paciente se está ejercitando, pulse el botón DKA/OSC para introducir el modo "DKA EXERCISE".	Movimiento excesivo brazo. Podría producir un error en la lectura de PA.	Ajuste el monitor en el MODO DKA.
Comprobar manguito: Compruebe que el manguito tiene el tamaño y la posición correctos.	Señal débil o no oscilométrica.	Asegúrese de que el manguito esté bien conectado. Asegúrese de que el manguito sea del tamaño correcto.
La medición ha superado el límite de tiempo Revise las conexiones del tubo de aire y asegúrese de que el manguito esté apretado.	Manguera bloqueada.	Pídale al paciente que deje caer el brazo sobre el costado y que lo relaje durante la lectura de PA (evitando una excesiva flexión o movimiento del brazo). Asegúrese de que no hay grandes dobleces ni pellizcos en la manguera del paciente.

55

Medidas fuera de rango

Si el valor de una medida de presión arterial se encuentra fuera de los límites autorizados por el Tango M2, se dice que se encuentra "fuera de rango" y se muestra en color amarillo.

En la vista de gráfico, la tabla representará en amarillo los valores fuera de rango. Si solamente parte de las lecturas completas de PA están fuera de rango, únicamente dicha parte de la barra será amarilla (arriba = sistólica; abajo = diastólica).

Si una medida de la FC no entra dentro de los valores autorizados del Tango M2, la FC cambiará de azul a amarillo.



Alarmas

Cuando una lectura sobrepasa un umbral de alarma preestablecido, al final de la medición se escuchará una señal sonora consistente en 5 pitidos. La medición que ha causado la alarma aparecerá en amarillo y en el espacio de la onda aparecerá un mensaje amarillo.

Las alarmas se fijan mediante las opciones [Menú principal > Alarmas](#).

Las alarmas relacionadas con normativas tendrán preferencia sobre las alarmas definidas por el usuario en caso de que las dos alarmas se activen al mismo tiempo. No obstante, los cinco pitidos correspondientes a la alarma serán los de la alarma definida por el usuario. Si es posible, el Tango M2 tratará de mostrar las dos alarmas, pero la alarma normativa será la alarma dominante en cualquier caso.

Las alarmas para mediciones fuera de rango se consideran de "baja prioridad" desde un punto de vista normativa ya que se usan para avisar al operario de que una medición ha caído fuera del rango de medición del monitor. Es responsabilidad del profesional sanitario determinar si la medición obtenida debe ser causa de preocupación sobre la base del estado físico del paciente.

Las alarmas sonarán entre 65 dB y 70 dB.

Alarma	Rango de alarma
PA sistólica alta	En el modo DKA: Ajustable por el usuario de 50 a 270 mmHg En el modo OSC: Ajustable por el usuario de 50 a 260 mmHg
PA sistólica baja	Ajustable por el usuario de 10 a 100 mmHg
PA sistólica alta	Ajustable por el usuario de 20 a 160 mmHg
Frecuencia cardíaca alta	Ajustable por el usuario de 40 a 200 lpm



Centros de mantenimiento

Para los clientes de América:

SunTech Medical, Inc.

Departamento de reparaciones

507 Airport Boulevard, Suite 117

Morrisville, NC 27560 EE.UU.

Tel: 800.421.8626

919.654.2300

Fax: 919.654.2301

Para los clientes de Europa, Oriente Medio, África, Asia y el Pacífico:

SunTech Medical, Ltd.

Departamento de reparaciones

Oakfield Industrial Estate

Eynsham, Oxfordshire OX29 4TS Reino Unido

Tel: 44 (0) 1865.884.234

Fax: 44 (0) 1865.884.235

EC	REP
----	-----

Preguntas más frecuentes

Aparece un mensaje de estado en el Tango M2. ¿Qué significa y qué debo hacer?

Puede encontrar más información sobre los mensajes de estado en dos sitios:

1. En la biblioteca electrónica de su Tango M2 encontrará consejos para solucionar los problemas rápidamente. Para acceder a la biblioteca electrónica desde el menú principal, seleccione [Configuración del monitor > Biblioteca electrónica > Mensajes de estado](#).
2. En la sección "Mensajes de estado y alarmas" de la guía del usuario del Tango M2 también encontrará información detallada sobre cada mensaje de estado y su solución.

El monitor Tango M2 devuelve un resultado de 0/0 después de realizar las mediciones de PA. ¿Qué debo hacer para obtener una lectura de la PA?

Existen determinadas condiciones ruidosas en las que el Tango M2 no puede medir la PA con exactitud. Cuando el Tango M2 se encuentra con estas situaciones, devuelve una lectura de 0/0. La colocación del micrófono es crucial para el buen funcionamiento del Tango M2; puede encontrar consejos de colocación del manguito en muchas partes.

1. En la biblioteca electrónica de su Tango M2 encontrará tutoriales para colocar el manguito rápidamente. Para acceder a la biblioteca electrónica desde el menú principal, seleccione [Configuración del monitor > Biblioteca electrónica > Tutoriales](#).
2. En la sección "Uso del Tango M2 durante una prueba de esfuerzo" de la guía del usuario del Tango M2 encontrará información sobre los tipos de manguito, el manguito Orbit-K y el kit para un solo paciente (USP).
3. Para colocar bien el micrófono, siga las instrucciones del tutorial sobre el manguito (ubicado en el sitio web de SunTech Medical en [Support \[Ayuda\] > Customer Technical Support \[Servicio técnico de atención al cliente\] > Video Tutorials \[Tutoriales en vídeo\]](#)).



Para verificar si el Tango M2 funciona correctamente con mi sistema de prueba de esfuerzo, ¿puedo utilizar un simulador de frecuencia cardíaca o de presión arterial?

Para verificar si el Tango M2 funciona correctamente con su sistema de prueba de esfuerzo no se puede utilizar un simulador de frecuencia cardíaca o de presión arterial. El monitor Tango M2 necesita que la señal ECG y los sonidos de Korotkoff recogidos por el micrófono del manguito se originen en la misma fuente, es decir, en el paciente.

¿Cómo puedo ajustar el brillo de la pantalla del Tango M2?

Puede ajustar el contraste de la pantalla del Tango M2 siguiendo estos pasos:

1. Desde la pantalla de funcionamiento, pulse una vez el botón SELECCIONAR. Esto le llevará a la pantalla del menú principal.
2. Con las flechas ARRIBA y ABAJO, seleccione Configuración del monitor y pulse el botón SELECCIONAR.
3. Con las flechas ARRIBA y ABAJO, seleccione Brillo y pulse el botón SELECCIONAR.
4. Con las flechas ARRIBA y ABAJO, ajuste el contraste de la pantalla. Cuando haya terminado, pulse el botón SELECCIONAR para confirmar su elección.
5. Con las flechas ARRIBA y ABAJO, seleccione SALIR dos veces para volver a la pantalla de funcionamiento.

¿Cómo puedo obtener la PAM en mi Tango M2?

Registre su monitor Tango M2 en línea o a través del correo electrónico para recibir la PAM como función de su monitor Tango M2. Tenga en cuenta que según el reglamento de la FDA, el mercado estadounidense no tiene acceso a la función de MAP. ([Support \[Ayuda\]](#) > [Sales Support \[Ventas\]](#) > [Product Registration \[Registrar el producto\]](#)).

¿Cómo limpio el manguito Orbit-K después de una prueba de esfuerzo?

Puede seguir cualquiera de los siguientes pasos:

1. Utilice una toallita desinfectante para el manguito o rocíe una solución de limpieza en un paño y limpie el manguito. Después, cuélguelo o deje que se seque.
2. Retire la cámara inflable y el micrófono del forro del manguito Orbit-K. Lave a máquina el forro en agua templada con un detergente suave (10-60 °C). Cuélguelo o deje que se seque. No introduzca el forro en la secadora.



ATENCIÓN: No lave a máquina la cámara inflable ni el micrófono.

En mi Tango M2 aparece el mensaje “Verificar calibración” o “Mantenimiento del equipo y calibración necesaria”. ¿Qué debo hacer?

Cada año es preciso verificar la calibración de la presión para preservar la exactitud de las lecturas de PA del Tango M2. Tendrá que ponerse en contacto con el centro de mantenimiento de SunTech Medical para solicitar ayuda. Asimismo será necesario contar con los siguientes elementos para comprobar la calibración.

Equipo necesario:

1. Manómetro electrónico calibrado o equivalente.
2. Manguito de 500 ml o manguito de adultos Orbit-K ajustado alrededor de algo que no se rompa ni quiebre (como ocurriría con el vidrio).
3. Pera de inflado manual con válvula de purga.
4. Tubo, piezas en T y diversos conectores, o puede solicitar el kit de tubos en T (ref. 98-0030-00 de SunTech).



Centros de mantenimiento

Para los clientes de América:

SunTech Medical, Inc.

Departamento de reparaciones

507 Airport Boulevard, Suite 117

Morrisville, NC 27560 EE.UU.

Tel: 800.421.8626

919.654.2300

Fax: 919.654.2301

Para los clientes de Europa, Oriente Medio, África, Asia y el Pacífico:

SunTech Medical, Ltd.

Departamento de reparaciones

Oakfield Industrial Estate

Eynsham, Oxfordshire OX29 4TS Reino Unido

Tel: 44 (0) 1865.884.234

Fax: 44 (0) 1865.884.235

EC	REP
----	-----

Declaración sobre la compatibilidad electromagnética

Este equipo ha sido probado, y se ha determinado que cumple con los límites para dispositivos médicos establecidos por la norma IEC60601-1-2: 2007. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación médica típica. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se lo instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales con otros dispositivos cercanos. No obstante, no existen garantías de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales con otros dispositivos, lo que puede determinarse apagando el equipo y encendiéndolo nuevamente, se recomienda al usuario intentar corregir las interferencias mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o cambiar de lugar el dispositivo receptor.
- Aumentar la separación entre los equipos.
- Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente a aquel al que están conectados los otros dispositivos.
- Solicitar asistencia al fabricante o al departamento de servicio técnico.

Los equipos portátiles y móviles de comunicación por radiofrecuencia pueden afectar al funcionamiento de los equipos electromédicos. El uso de accesorios, transductores y cables distintos a los especificados puede provocar un aumento de las emisiones o una disminución en la inmunidad del Tango M2. El Tango M2 no debe situarse apilado o adyacente a otros equipos. Si es necesario utilizar los equipos de ese modo, debe verificarse el funcionamiento normal del Tango M2 en la respectiva configuración.

Guía y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas

El monitor Tango M2 está diseñado para el uso en los entornos electromagnéticos especificados a continuación. El cliente o el usuario del monitor Tango M2 debe asegurarse de que se utilice en dicho tipo de entornos.

Prueba de emisiones	Cumplimiento	Entorno electromagnético: guía
---------------------	--------------	--------------------------------

Guía y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas

Emisiones de RF CISPR 11	Grupo 1	El monitor Tango M2 utiliza energía de RF únicamente para su funcionamiento interno. Por lo tanto, sus emisiones de RF son muy bajas y es poco probable que provoquen alguna interferencia con equipos electrónicos cercanos.
	Clase B	
Emisiones de armónicas de conformidad con la norma IEC 61000-3-2	Clase A	El monitor Tango M2 es adecuado para el uso en cualquier establecimiento, incluidos los establecimientos domésticos y los que se encuentren conectados a una red pública de suministro eléctrico de baja tensión que abastezca a edificios utilizados con fines domésticos.
Fluctuaciones de tensión/emisiones fluctuantes de conformidad con la norma IEC 61000-3-3	Cumple	

63

Guía y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética

El monitor Tango M2 está diseñado para el uso en los entornos electromagnéticos especificados a continuación. El cliente o el usuario del monitor Tango M2 debe asegurarse de que se utilice en dicho tipo de entornos.

Prueba de inmunidad	Nivel de prueba IEC 60601	Nivel de conformidad	Entorno electromagnético: guía
Descarga electrostática (ESD) IEC 61000-4-2	±6 kV contacto ±8 kV aire		Los pisos deben ser de madera, concreto o losetas de cerámica. Si los pisos están cubiertos con material sintético, la humedad relativa debe ser, como mínimo, del 30%.
Transitorios/ráfagas eléctricas rápidas IEC 61000-4-4	±2 kV para líneas de alimentación ±1 kV para líneas de entrada/salida		La calidad del suministro eléctrico debe ajustarse a la de un típico entorno comercial u hospitalario.
Impulsos de tensión IEC 61000-4-5	±1 kV modo diferencial ±2 kV modo común		

Guía y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética

Disminuciones de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión en las líneas de entrada de la fuente de alimentación IEC 61000-4-1	$< 5\% U_T (> 95\%$ caída de $U_T)$ para 0,5 ciclos $40\% U_T (> 60\%$ caída de $U_T)$ para 5 ciclos $70\% U_T (> 30\%$ caída de $U_T)$ para 25 ciclos $< 5\% U_T (> 95\%$ caída de $U_T)$ para 5 s	La calidad del suministro eléctrico debe ajustarse a la de un típico entorno comercial u hospitalario. Si el usuario requiere el uso continuo del monitor Tango M2 durante las interrupciones de la red de suministro eléctrico, se recomienda alimentar el monitor Tango M2 desde una fuente de alimentación ininterrumpida o una batería.
Campo magnético de la frecuencia de alimentación (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	3 A/m	Los niveles de los campos magnéticos de la frecuencia de alimentación deben ser los característicos de una ubicación típica en un entorno comercial u hospitalario típico.
AVISO: U_T es el voltaje de la corriente alterna previo a la aplicación del nivel de prueba.		

En caso de pérdida de alimentación al monitor, se guardarán todos los datos y las configuraciones del usuario. El monitor se encenderá con las mismas configuraciones que antes de la pérdida de alimentación.

Prueba de inmunidad	Nivel de prueba IEC 60601	Nivel de conformidad	Entorno electromagnético: guía
<p>RF conducida IEC 61000-4-6</p> <p>RF irradiada IEC 61000-4-3</p>	<p>3 Vrms, de 150 kHz a 80 MHz</p> <p>3 V/m, de 80 MHz a 2,5 GHz</p>	<p>3V</p> <p>3V/m</p>	<p>Durante su uso, los sistemas móviles y portátiles de comunicación por RF deben mantener ante el Tango M2 (incluidos los cables) una separación adecuada. Ésta no será inferior a la distancia recomendada por protección, que se calcula según la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor.</p> <p>Distancia de separación recomendada:</p> $D = [3,5/V_1] \sqrt{P}$ $D = [3,5/E_1] \sqrt{P} \text{ 80 MHz - 800 MHz}$ $D = [7/E_1] \sqrt{P} \text{ 800 MHz - 2,5 GHz}$ <p>Donde P es la máxima potencia nominal del transmisor en vatios (W) según las especificaciones de su fabricante y d es la distancia recomendada en metros (m).</p> <p>De acuerdo con un estudio electromagnético realizado in situ,^a las intensidades de campo de los transmisores de RF fijos deben ser inferiores al nivel de conformidad en toda la gama de frecuencias.^b</p> <p>Cerca de los equipos que presentan el siguiente símbolo gráfico, pueden producirse interferencias:</p> 
<p>Nota 1: En el caso de 80 MHz y 800 MHz, se aplica el valor mayor.</p> <p>Nota 2: Estas directrices no siempre son aplicables. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y el reflejo de las construcciones, los objetos y las personas.</p>			
<p>^a Las intensidades de campo de los transmisores fijos, estaciones base de radioteléfonos, teléfonos móviles, inalámbricos y radios terrestres móviles, estaciones de radioaficionados, radio AM/FM, TV, etc., no pueden calcularse teóricamente con precisión. Para determinar el entorno electromagnético con respecto a los transmisores de RF fijos, hay que analizar el emplazamiento. Si la intensidad de campo registrada en el lugar de uso del Tango M2 sobrepasa el nivel de conformidad indicado anteriormente, el equipo Tango M2 deberá ser observado para comprobar el normal funcionamiento. Si se observa un funcionamiento anómalo, puede ser necesario adoptar medidas adicionales (por ejemplo, cambiar la orientación o el emplazamiento del Tango M2).</p> <p>^b En el rango de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz, la intensidad de campo debe ser inferior a [V1] V/m.</p>			

Distancias recomendadas entre los equipos portátiles/móviles de comunicación por radiofrecuencia y el Tango M2.

El Tango M2 ha sido diseñado para el funcionamiento en un entorno electromagnético en el que las perturbaciones de RF radiadas están controladas. El cliente o usuario del Tango M2 puede ayudar a evitar las interferencias electromagnéticas si respeta la distancia mínima entre los equipos portátiles/móviles de comunicación por radiofrecuencia (transmisores) y el Tango M2. Para ello debe proceder del modo indicado a continuación, en función de la máxima potencia de salida del aparato de comunicación.

Máxima potencia nominal de salida del transmisor Vatios (W)	Distancia de protección según la frecuencia del transmisor, metros (m)		
	150 kHz - 80 MHz $D = [3,5/\sqrt{P}] \sqrt{P}$	80 MHz - 800 MHz $D = [3,5/E_1] \sqrt{P}$	800 MHz - 2,5 GHz $D = [7/E_1] \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Nota 1: En el caso de 80 MHz y 800 MHz, se aplica el valor mayor. Nota 2: Estas directrices no siempre son aplicables. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y el reflejo de las construcciones, los objetos y las personas.

En el caso de aquellos transmisores cuya potencia nominal máxima no aparece en la tabla, la distancia d recomendada en metros (m) puede estimarse mediante la ecuación aplicable de la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia nominal máxima del transmisor en vatios (W) según las especificaciones del fabricante.

Especificaciones: medición de la presión arterial

Medición:	Auscultatoria, con sincronización de la onda R y análisis de los sonidos de K durante todas las fases estáticas y activas de la prueba de esfuerzo Las presiones sistólicas se correlacionan con el sonido de Korotkoff K-1. Las presiones diastólicas se correlacionan con el sonido de Korotkoff K-5. El dispositivo está diseñado para funcionar en presencia de un ritmo sinusal de ECG normal. Existen algunas condiciones físicas (bloqueo de rama, arritmias, fibrilación auricular, fibrilación ventricular, marcapasos, etc.) que pueden limitar la capacidad del Tango M2 para obtener una lectura precisa.	
Rango:	Presión (modo DKA): Diastólica: 20-160 mmHg / Sistólica: 40-270 mmHg	Frecuencia cardíaca: 40-200 LPM (latidos por minuto)
	Presión (modo OSC): Diastólica: 20-160 mmHg / Sistólica: 40-260 mmHg	
Precisión:	Cumple o excede las normas ANSI / AAMI / ISO 81060-2:2009 estándar para la precisión no invasiva (± 5 mmHg error medio con 8 mmHg de desviación estándar).	
Condiciones de uso:	<p>Funcionamiento: De 10 °C a 40 °C / de 15% a 90% de humedad relativa, sin condensación / de 700 kPa a 1060 kPa. El uso del monitor a una temperatura superior a la máxima puede transmitir al paciente una temperatura superior a 41 °C (la máxima registrada ha sido de 41,6 °C) en las zonas de contacto con el monitor. Es responsabilidad del operario decidir si esta temperatura es demasiado alta en función de las condiciones del paciente y, de ser así, asegurarse de que la temperatura ambiente del entorno sea inferior a 38 °C.</p> <p>Almacenamiento: De -20°C a 65°C / de 15% a 90% de humedad relativa, sin condensación / de 500 kPa a 1060 kPa. El sistema puede verse afectado si se utiliza o almacena en condiciones diferentes a los rangos de temperatura y humedad especificados anteriormente.</p>	
Alimentación:	Fuente de alimentación externa, use únicamente el número de pieza 19-0012-01 de SunTech. Entrada: 100-240 VCA a 1,5 A máx, 50-60 Hz. Salida: conector de entrada tipo IEC 320 de 9 VCC a 5 A	
Calibración:	La precisión de los transductores e indicadores del manguito debe verificarse anualmente.	
Sistemas de seguridad:	Circuito de presión excesiva por hardware independiente y algoritmo de presión excesiva por software redundante para limitar la presión del manguito a menos de 300 mmHg (+20/-10 mmHg). Circuito temporizador por hardware independiente y algoritmo de temporizador por software redundante para limitar la duración de un ciclo de presión arterial a menos de 180 segundos.	
Dimensiones:	Tamaño: 24,0 cm × 17,4 cm × 11,5 cm Peso: 1,68 kg	
Normas:	IEC 60601-1:2005 + CORR.1 (2006) + CORR. 2: 2007, IEC 60601-1-2: 2007 EMC, IEC 80601-2-30: 2009, ISO 80601-2-61: 2011, ANSI/AAMI ES60601-1:2005, DIN ISO 15223-1:2012, ISO 10993-1, 2009, ISO 10993-5, 2009, CEN EN ISO 10993-10, 2010, ANSI/AAMI/ISO 81060-2:2009, DS DS/EN 50419: 2006, EN ISO 14971:2009, CSA C22.2 No. 60601-1	
Clasificaciones:	Clasificación del equipo: Clase I Modo de operación: Continuo.	

Avisos acerca de los datos de presión arterial

Las lecturas de la presión arterial pueden verse afectadas por el lugar de medición, la posición del paciente, el ejercicio o el estado fisiológico del paciente. Los factores relacionados con el entorno o con el funcionamiento del dispositivo que pueden afectar a la medición pueden ser marcapasos, arritmias comunes como latidos ventriculares o auriculares prematuros, fibrilación auricular, arterioesclerosis, hipoperfusión, diabetes, edad, embarazo, preeclampsia, nefropatías, movimiento del paciente, temblores y escalofríos.

Especificaciones: oxímetro de pulso

Exactitud en reposo:	70% - 100% \pm 2 dígitos (\pm 1 desviación estándar*)
Hipoperfusión	70% - 100% \pm 2 dígitos (\pm 1 desviación estándar*)
Movimiento	70% - 100% \pm 3 dígitos (\pm 1 desviación estándar*)

* La desviación estándar es una medida estadística (hasta el 32% de las lecturas pueden estar fuera de esos límites).

No se puede utilizar una prueba funcional para evaluar la precisión de la sonda de un oxímetro de pulso o del monitor de un oxímetro de pulso. El uso del modelo de simulación 8000S del oxímetro Nonin devolverá una lectura de aproximadamente el 98% de la SpO₂.

El cable del SpO₂ tiene una calificación de IPX1, lo que significa que el oxímetro de pulso está protegido contra los efectos nocivos de las salpicaduras de agua según la norma IEC 60529.

Garantía limitada

SunTech Medical, Inc. proporciona al comprador original la siguiente garantía limitada a partir de la fecha de facturación.

Todos los monitores seriadados	24 meses
Manguitos Orbit-K	6 meses
Accesorios como cables del paciente, micrófonos o artículos desechables	90 días



SunTech Medical, Inc. garantiza que cada instrumento está libre de defectos en el material y la mano de obra. La responsabilidad, en virtud de esta garantía, cubre la reparación del instrumento cuando se lo devuelve a la fábrica desde las instalaciones del cliente, dentro de los Estados Unidos, con franqueo prepagado. SunTech Medical, Inc. reparará cualquier componente o pieza que encuentre defectuoso durante el período de esta garantía limitada. En caso de que surja un defecto aparente, el comprador original primero debe notificar a SunTech Medical, Inc. acerca del defecto sospechado. El instrumento debe ser embalado cuidadosamente y enviado con franqueo prepagado a:

SunTech Medical, Inc.
Departamento de reparaciones
507 Airport Boulevard, Suite 117
Morrisville, NC 27560 EE.UU.
Tel: 800.421.8626
919.654.2300
Fax: 919.654.2301



SunTech Medical, Ltd.
Departamento de reparaciones
Oakfield Industrial Estate
Eynsham, Oxfordshire OX29 4TS Reino Unido
Tel: 44 (0) 1865.884.234
Fax: 44 (0) 1865.884.235

El instrumento será reparado en el menor tiempo posible y enviado nuevamente con franqueo prepagado mediante el mismo método de envío a través del cual fue recibido por la fábrica.

Esta garantía limitada será nula si el instrumento se ha dañado por accidente, uso inadecuado, negligencia o caso fortuito, o si ha sido reparado por una persona no autorizada por SunTech Medical, Inc.

Esta garantía limitada contiene todas las obligaciones de SunTech Medical, Inc., y no se otorga ninguna otra garantía expresa, implícita ni establecida por la ley. No se autoriza a ningún representante ni empleado de SunTech Medical, Inc. a asumir ninguna otra responsabilidad ni otorgar ninguna otra garantía que no sean las expresadas en el presente documento.

Anexo A. Sistemas de prueba de esfuerzo compatibles

Los siguientes sistemas de prueba de esfuerzo son compatibles con el Tango M2.

El menú principal del Tango M2 dispone de ajustes predeterminados para muchos sistemas de prueba de esfuerzo. Si su sistema de prueba de esfuerzo no se encuentra entre ellos, utilice la configuración personalizada.

Fabricante del sistema de prueba de esfuerzo	Sistema de prueba de esfuerzo	Ajuste predeterminado	Crear una configuración personalizada (Protocolo; disparador ECG)
Amedtec	ECGpro	ECGpro	
Burdick	Quest	Quest	
	HeartStride		SUNTECH; subida digital
Cambridge Heart	HearTwave II	HearTwave II	
	CH 2000	CH 2000	
Cardinal Health	Oxycon Jaegar		SUNTECH; Interno
Cardioline	Cube Stress		BOSOTRON; subida digital
Cardiolex	EC Sense		STANDARD; subida digital
Delmar Reynolds	CardioDirect	CardioDirect	
DMS	CardioScan		SUNTECH; Analógico
EDAN	SE-1010 PC ECG		SUNTECH; subida digital
EDAN	ECG SE-12 Express		SUNTECH; subida digital
Esaote (Biosound)	Esaote Formul@	Formula/Formul@	
	Biosound Esaote Formula for Achimed	Formula/Formul@	

Fabricante del sistema de prueba de esfuerzo	Sistema de prueba de esfuerzo	Ajuste predeterminado	Crear una configuración personalizada (Protocolo; disparador ECG)
Fukuda Denshi	FCP-7541/7542	FCP-7541/7542	
	ML-3600	ML-3600	
	ML-9000	ML-9000	
GE	CardioSoft v6.01+	GE CardioSoft	
	Case / Case 8000	Case 8000	
GE (Marquette)	Case 12 / Case 15 / Case 16 / Centra	Case 12, Case 15, Case 16 or Centra	
	MAC 5000/5500	Mac 5000/5500	
	MAC VU	Mac-Vue-Stress	
Marquette	Hellige CardioSys	CardioSys	
	Sensormedics Max 1	Max-1	
MedSet Flashlight	ERGO (PADSY by MedSet)	Medset	
Midmark Diagnostics	IQmark EZ Stress	IQmark EZ Stress	
Mortara	X-Scribe	X-Scribe	
Nasiff Associates	Cardio-Card	Cardio-Card	
Nihon Kohden	Cardiofax ECG 1550 / 1560	ECG-1550/1560	
	Cardiofax ECG 9320A	ECG-1550/1560	
Norav	Stress ECG		SUNTECH; subida digital
Philips	StressVue (2nd Gen)	StressVue	
	StressVue (1st Gen)	StressVue	
	ST80i		SUNTECH; subida digital
Pulse Biomedical	QRS Card	QRS Card	
	QRS Oxford Medilog Stress	Medilog Stress	

Fabricante del sistema de prueba de esfuerzo	Sistema de prueba de esfuerzo	Ajuste predeterminado	Crear una configuración personalizada (Protocolo; disparador ECG)
Quinton	Q-Stress V4.0+		SUNTECH; subida digital
	Q-Stress	Q-Stress	
	Q 4500	Q4500/Q5000	
	Q 3000 / Q 4000 / 710	Q3000/Q4000	
Sensormedics Vmax	CardioSoft	CardioSys	
	Max-1	Max-1	
	SMC 3-lead		SUNTECH; Interno
	CASE 8000	Case 8000	
Viasys	Encore Vmax	CardioSys	
Welch Allyn	CardioPerfect	CardioPerfect	

Compruebe la lista actualizada de notas de la interfaz que puede descargar desde el sitio web de SunTech Medical:

www.SunTechMed.com.

Anexo B. Cables para los sistemas de prueba de esfuerzo compatibles

Póngase en contacto con su representante comercial de SunTech Medical para pedir los siguientes elementos:

Cables de interfaz RS-232 y ECG

Sistema de prueba de esfuerzo	Cable RS-232	Cable disparador de ECG
AMEDTEC ECGpro	91-0013-01	91-0066-01
Burdick Quest	91-0013-01	91-0011-01
Cambridge Heart CH 2000 & HearTwave II	91-0065-01 (RS-232 y ECG)	-----
Delmar Reynolds CardioDirect con CardioCollect	91-0013-01	91-0066-01

Sistema de prueba de esfuerzo	Cable RS-232	Cable disparador de ECG
DMS	91-0013-01	91-0011-01
EDAN SE-1010	91-0013-01	Contacto con EDAN para el cable
EDAN ECG SE-12	Contacto con EDAN para el cable	Contacto con EDAN para el cable
Esaote Formul@,	91-0048-00	91-0049-00
Esaote Formul@ para Archimed	91-0048-00	91-0072-00
Fukuda Denshi	Contacto con Fukuda Denshi para el cable	Contacto con Fukuda Denshi para el cable
GE CardioSoft	91-0013-01	91-0009-01
GE CASE	91-0013-01	91-0009-01
GE CASE 8000	91-0013-01	91-0009-01
Marquette CASE 12; CASE 15; CASE 16	91-0012-00	91-0011-01
Marquette Centra	91-0012-00 / 91-0013-01	91-0011-01
GE MAC 5500 Stress	91-0010-01	91-0009-01
Marquette / Sensematics Max-1	91-0010-01	91-0009-01
Marquette-Hellige CardioSys	91-0013-01	91-0016-00
Medset Flashlight Ergo	91-0013-01	-----
Midmark Diagnostics IQmark EZ Stress	91-0013-01	91-0011-01
Mortara X-Scribe	91-0013-01	91-0011-01
Nasiff Associates Cardio-Card	91-0013-01	91-0018-02
Nihon-Kohden Cardiofax ECG-9320A	91-0061-01	91-0060-00
Nihon-Kohden Cardiofax 1550/1560	91-0061-01	91-0018-02
Norav Stress	91-0013-01	91-0011-01
Oxford Medilog Stress/PBI QRS Card	91-0013-01	Consulte en PBI u Oxford

Sistema de prueba de esfuerzo	Cable RS-232	Cable disparador de ECG
Philips Stress Vue	91-0013-01	91-0011-01
Quinton Q3000/Q4000/710	-----	91-0018-02
Quinton Q4500	91-0013-01	91-0018-02
Quinton Q-Stress	91-0013-01	91-0018-02
Welch Allyn CardioPerfect Workstation	91-0013-01	91-0018-03

Cables separadores

Sistema de prueba de esfuerzo	Número de pieza
GE CASE: uso con ecocardiógrafo	91-0053-01
GE CASE 8000: uso con ecocardiógrafo	91-0053-01
Marquette/Sensormedics Max-1: uso con ecocardiógrafo	91-0053-01
Marquette MAC 5000/5500: necesario	91-0069-00

Cables USB (Cable opcional , reemplaza conexión RS-232)

Sistema de prueba de esfuerzo	Número de pieza
Kit de conexión USB (cable, controlador del software e instrucciones de uso)	98-1010-00

Anexo C. Precisión de la medición del oxímetro SpO₂

La tabla siguiente muestra los valores de ARMS (exactitud según la media cuadrática)

Estadística	Resultado	Especificación
Sesgo 70-100	-1,54	
Sesgo 70-80	-1,41	

Estadística	Resultado	Especificación
Sesgo 80-90	-1,97	
Sesgo 90-100	-1,28	
Varianza intersujetos	7,4	
Varianza intrasujetos	0,7	
ARMS 70-100	1,83	±2
ARMS 70-80	1,72	±2
ARMS 80-90	2,17	±3
ARMS 90-100	1,59	±2

Resumen de las pruebas


Nonin Medical Incorporated llevo a cabo las pruebas de exactitud del valor de SpO₂, movimiento e hipoperfusión tal y como se describen a continuación.

Prueba de exactitud del valor de SpO₂

La prueba de la exactitud del valor de SpO₂ se llevó a cabo durante estudios en los que se indujo la hipoxia a personas sanas, no fumadoras, de todo tipo de piel, en condiciones de reposo y esfuerzo, en un laboratorio de investigación independiente. Los participantes en el estudio eran hombres y mujeres entre 19 y 35 años. El valor de saturación de hemoglobina arterial (SpO₂) de los sensores se comparó con el valor de oxígeno de la hemoglobina arterial (SpO₂), determinado a partir de muestras de sangre con ayuda de un cooxímetro de laboratorio. La precisión de los sensores en comparación con las muestras analizadas por el cooxímetro estuvo entre el 70% y el 100%. Los datos de exactitud se calcularon mediante la media cuadrática (valores de ARMS) para todos los pacientes, según la norma ISO 80601-2-61.

Prueba de hipoperfusión

Esta prueba utiliza un simulador de la SpO_2 para devolver un frecuencia del pulso estimada, con una configuración de la amplitud ajustable en función de diferentes niveles de SpO_2 . El módulo debe preservar la exactitud conforme a la norma ISO 80601-2-61 para SpO_2 en la amplitud de pulso más baja que se pueda obtener (0,3% de modulación).

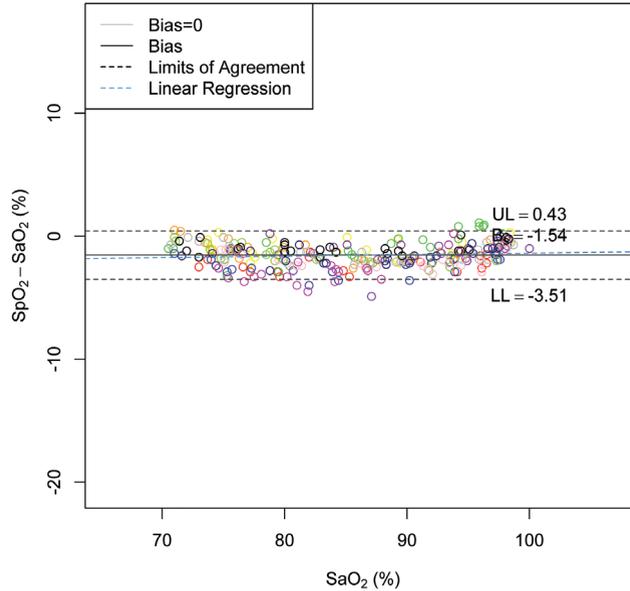



Anexo D. Instrucciones de descarga

Siga estas instrucciones para descargar los datos de la tabla de mediciones y convertir los datos a un formato de hoja de cálculo compatible con Excel.

1. Introduzca la unidad USB en el puerto USB-A del monitor Tango M2 (el monitor puede tardar unos instantes en identificar la unidad USB).
2. Utilice las flechas y la tecla de selección para ir al menú principal y desde allí seleccione "Tabla de medición".
3. Navegue hasta la opción "Descargar datos" y selecciónela.
4. Aparecerá un mensaje que dice "Descarga en curso". Cuando finalice, indicará "Descarga completa". A continuación se ofrecen dos opciones. La primera es borrar la tabla de medición (le recomendamos hacerlo cada vez que descargue datos en su unidad USB) y la segunda es salir. Para salir pulse la tecla SELECCIONAR. En este momento ya puede retirar la unidad USB.
5. Conecte la unidad USB a su PC. Cuando explore el contenido habrá un archivo llamado "Results" (Resultados). Abra este archivo.
6. Dentro del archivo habrá un documento que deberá ser identificado. Comenzará con el año, seguido del mes, el día y otros identificadores, según este esquema: AAAAMMDD#####. Este identificador es único para cada serie de datos de PA descargada desde el Tango M2 (usted deberá fijarse solamente en la fecha a modo de indicador personal). Termine y siga con el próximo paso. Estos son los datos que ha importado del Tango M2.

77

Conversión de los datos a un formato compatible con Excel

Para abrir esta serie de datos como un archivo Excel, siga estos pasos:

1. Abra el programa Microsoft Office Excel en su sistema operativo Windows (debería aparecer una hoja de Excel en blanco).
2. Haga clic en el botón de Office (desde el que se puede abrir, guardar o imprimir su trabajo) y seleccione "Abrir".
3. Elija "Mi PC" en la columna de búsqueda.
4. Tendrá que seleccionar la unidad conectada al puerto USB-A (siempre que sea la misma que la que tenía antes).
Ahora deberá ver un archivo llamado "Results" (resultados).
5. Haga clic en los archivos de resultados. Según la configuración de su PC, puede que tenga que hacer clic en la parte de abajo de la ventana para seleccionar el tipo de archivo "Todos los archivos (*.*)", para que se visualice la información que acaba de importar del Tango M2.
6. Seleccione el archivo que acaba de cargar en la unidad USB y haga clic en "Abrir".

7. Aparecerá una ventana que le avisará de que el archivo que está intentando abrir tiene un formato diferente que el especificado por la extensión del archivo. Le preguntará si desea abrir el documento. Seleccione "Sí".
8. Una ventana nueva le guiará por un proceso de importación de 3 pasos: En la primera ventana seleccione "Delimitado" (puede que ya esté seleccionado), cambie el archivo de origen a Unicode [UTF-8] y haga clic en "Siguiente". En la segunda ventana, seleccione "Comas y tabulaciones" (puede que ya esté seleccionado) y haga clic en "Siguiente". En la última ventana, seleccione "General" (puede que ya esté seleccionado) y haga clic en "Finalizar".
9. Ahora ya puede visualizar sencillamente su hoja de cálculo en formato de filas y columnas.



SunTech Medical[®]
Brilliant Blood Pressure Solutions™

SunTech Medical, Inc.
507 Airport Boulevard, Suite 117
Morrisville, NC 27560-8200 USA
Tel: + 1.919.654.2300
1.800.421.8626
Fax: + 1.919.654.2301

www.SunTechMed.com

SunTech Medical, Ltd.
Oakfield Industrial Estate
Stanton Harcourt Road
Eynsham, Oxfordshire OX29 4TS
England
Tel: + 44 (0) 1865.884.234
Fax: + 44 (0) 1865.884.235



www.SunTechMed.com

SunTech Medical, Ltd.
2/F of Building A, Jinxiongda Technology Park
Guanlan, Bao'an District Shenzhen, 518110, PRC
Tel: + 86-755-2958 8810
+ 86-755-29588986 (Ventas)
+ 86-755-29588665 (Servicio técnico)
Fax: + 86-755-2958 8829

www.CN.SunTechMed.com

ETL CLASSIFIED



Intertek
ITS
MEDICAL
ELECTRICAL
EQUIPMENT



0413

Pieza núm. 80-0055-04
Rev. B