

 **SUNTECH**



血压袖带家族

三十年来，SunTech医疗一直是临床级血压测量产品和技术的卓越供应商。全球80多家公司信赖SunTech医疗，并在他们的产品中使用我们的OEM无创血压解决方案。无数临床医生因此而受益于我们的产品，每天为他们的临床诊疗提供重要信息。

## 准确的血压测量从袖带开始

毫无疑问，我们能制造出一整套卓越的临床级血压袖带，得益于几十年的血压测量技术开发经验。SunTech血压计袖带不仅提供卓越的临床性能，还能满足制造商对感染控制和成本控制的要求。

## 真正的选择

虽然市面上的血压袖带产品很多，但能生产血压袖带的很少，能与制造商合作并帮助他们实现感染控制和供应链管理目标的更是寥寥无几。SunTech是为数不多的公司之一。我们根据严格的质量准则生产每一款袖带，并在亚洲、美国（东海岸和西海岸）和欧洲设有仓库，以确保您的供应链高效、不间断地运作。无论您是处理多个医院一体化采购还是单一机构需求，我们训练有素的员工都可以帮助快速有效地解决问题。除了销售之外，我们仍然相信强大的客户关系对任何产品的成功都至关重要。

## 标准化和精简

大多数制造商都知道，在整个工厂内对单个血压袖带供应商和连接器类型进行标准化可以改进工作流程，降低SKU和库存成本，并简化供应链。的确，SunTech有一整套袖带标准化设计，允许袖带在医疗机构的任何场景使用，而不用考虑设备的品牌。这需要制造商和供应商之间的密切合作和沟通，这是我们SunTech引以为傲的。事实上，SunTech对我们的产品、售后服务和支持充满信心，我们不需要通过使用专有连接器锁定您的业务。



## 我们涵盖了您的各种需求

我们的全系列临床级血压袖带符合完全符合标准，可为您提供一次性、可重复使用和耐用等多种选择。

在整个产品线中，我们具有专利的、运动容差的血压监测仪不论是在临床使用还是医学研究中之所以能提供准确、可靠的数据，其中价格合理、品质优异的袖带血压就是不可或缺的一部分。



# 一次性柔质袖带 单病患使用



## *Soft Disposable Cuffs*

控制感染是患者护理的关键，使用正确的血压袖带至关重要。这就是为什么我们开发了一整套一次性血压袖带。它采用柔软耐用的面料，确保佩戴舒适、测量可靠。楔形设计便于准确佩戴，还可在袖带上直接标记患者姓名！

**患者标识：**专用位置用于标记患者。尽量减少交叉污染。

**袖带标准化计划（CSP）：**通过一个袖带连接器实现设备专业的标准化；一个袖带，任何病人，任何监测仪，任何科室。

**经济性：**定价支持单个患者使用，特别是在需要控制感染的情况下。

**患者舒适性：**柔软的材料、锥形的端部和圆形的边缘提供了柔和的袖带方案。

**易用性：**楔形端部便于袖带使用。颜色差异便于快速选择尺寸。内部和外部范围标志确保准确的袖带尺寸和适合度。

**耐久性：**耐用的单片设计，可多次充气。

**可靠性：**100%泄漏测试，确保准确性和可靠性。

**规范：**满足AHA、AAMI-SP10和MDR等指导原则，值的信赖。

**材料：**非天然橡胶乳胶制成，以提升患者安全。





## 技术指标



范围标志	尺码 (颜色)	范围 (cm)	气囊 长×宽 (mm)	整体 长×宽 (mm)	快接口	螺纹接口	快接口 (塑料)
	婴儿 (橘色)	8-13	120 x 54	228 x 59	98-0400-00	98-0400-20	98-0400-40
	儿童 (绿色)	12-19	160 x 83	314 x 88	98-0400-01	98-0400-21	98-0400-41
	小号成人 (青绿)	17-25	203 x 108	440 x 113	98-0400-03	98-0400-23	98-0400-43
	小号成人+ (青绿)	18-29	232 x 116	425 x 121	98-0400-0K	98-0400-2K	98-0400-4K
	成人 (深蓝)	23-33	275 x 140	505 x 145	98-0400-05	98-0400-25	98-0400-45
	成人+ (深蓝)	28-40	320 x 160	615 x 165	98-0400-0A	98-0400-2A	98-0400-4A
	大号成人 (深红)	31-40	330 x 173	645 x 178	98-0400-07	98-0400-27	98-0400-47
	大号成人+ (深红)	40-55	460 x 175	770 x 180	98-0400-0C	98-0400-2C	98-0400-4C
	超大号 (棕色)	38-50	400 x 210	755 x 215	98-0400-09	98-0400-29	98-0400-49



警告：使用鲁尔接头可能会误将袖带连接到静脉 (IV) 管，从而导致空气被泵入血管而引发严重伤害或死亡

单气管



范围标志	尺码 (颜色)	范围 (cm)	气囊 长×宽 (mm)	整体 长×宽 (mm)	鲁尔接头公口 (塑料)	快接口 (塑料)
	新生儿#1 (橘色)	3-6	64 x 21	120 x 23	98-0400-80	98-0400-99
	新生儿#2 (青绿)	4-8	73 x 27	152 x 30	98-0400-81	98-0400-96
	新生儿#3 (绿色)	6-11	98 x 38	191 x 42	98-0400-82	98-0400-97
	新生儿#4 (蓝色)	7-13	119 x 46	232 x 50	98-0400-83	98-0400-98
	新生儿#5 (深红)	8-15	129 x 53	276 x 57	98-0400-84	98-0400-90

## 设计指标

袖带组件 材料  
 袖带外层 PVC/聚酯非织造复合材料  
 钩面 PVC  
 毛面 PVC  
 通管 PVC  
 气嘴 PVC

法规要求  
 符合美国心脏协会80601-2-30指南  
 符合 (EU)2017/745 医疗设备规定  
 符合ISO 10993标准

## 符号

	指示线		产品符合 (EU)2017/745 医疗设备规定		不含DEHP
	袖口指示线必须在标记范围内		臂围		仅由持照从业者或根据持照从业者的指示进行设备销售
	动脉符号和箭头应置于肱动脉或股动脉上方		袖带批号		警示标志
	不含天然胶乳		制造商		警告消息

# 单体袖带 耐用型



## One Piece Cuffs

单体式、耐用袖带是一种价格合理的袖带解决方案。它设计方便清洁和消毒，强度足以在任何临床环境中重复使用。在如今严格感染控制规范导致成本压力不断增加的情况下，它是理想的选择。

**易于消毒：**在不影响使用寿命的情况下将交叉污染降至最低

**高价值：**通过采用单体式结构实现袖带价格合理、可重复使用，还具有大多数临床环境所需的耐用性。

**简单易用：**独特的楔形尾翼设计使该耐用型袖带比普通直袖带更易于包裹和使用。尺寸颜色和范围标志区分让袖带尺寸、适合度和准确性的选择更容易。

**佩戴舒适：**通过消除使用中可能刺激患者的锐角，提高患者舒适度。

**可靠性：**100%泄漏测试，确保准确性和可靠性。

**规范：**满足AHA、AAMI-SP10和MDR等指导原则，值的信赖。


**多种配置：**具有各种接头选项的单气管或双气管配置，可灵活与大多数医疗机构设备连接。

**材料：**非天然橡胶乳胶、PVC或DEHP制成，以提升患者安全。



## 技术指标

单气管

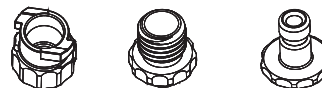

范围标志	尺码 (颜色)	范围 (cm)	气囊长×宽 (mm)	整体长×宽 (mm)	快接母口	螺纹接口	快接公口 (塑料)
	婴儿 (橘色)	8-13	120 × 54	228 × 59	98-0600-00	98-0600-20	98-0600-40
	儿童 (绿色)	12-19	160 × 83	314 × 88	98-0600-01	98-0600-21	98-0600-41
	小号成人 (青绿)	17-25	203 × 108	440 × 113	98-0600-03	98-0600-23	98-0600-43
	小号成人+ (青绿)	18-29	232 × 116	425 × 121	98-0600-0K	98-0600-2K	98-0600-4K
	成人 (深蓝)	23-33	275 × 140	505 × 145	98-0600-05	98-0600-25	98-0600-45
	成人+ (深蓝)	28-40	320 × 160	615 × 165	98-0600-0A	98-0600-2A	98-0600-4A
	大号成人 (深红)	31-40	330 × 173	645 × 178	98-0600-07	98-0600-27	98-0600-47
	大号成人+ (深红)	40-55	420 × 175	770 × 180	98-0600-0C	98-0600-2C	98-0600-4C
	超大号 (棕色)	38-50	400 × 210	755 × 215	98-0600-09	98-0600-29	98-0600-49

## 设计指标

袖带组件	材料
袖带外层	尼龙, 丹尼尔系数200/聚氨酯复合材料
钩面	尼龙
毛面	尼龙
缝线	尼龙
气囊	整合气囊
通管	TPE (热塑性弹性体)
气嘴	聚氨酯

法规要求  
符合美国心脏协会80601-2-30指南  
符合 (EU)2017/745 医疗设备规定  
符合ISO 10993标准

## 符号

	指示线
	袖口指示线必须在标记范围内
	动脉符号和箭头应置于肱动脉或股动脉上方
	不含天然胶乳
	不含DEHP
	警告消息

	产品符合 (EU)2017/745 医疗设备规定
	臂围
	袖带批号
	制造商
	警示标志
	仅由持照从业者或根据持照从业者的指示进行设备销售



# 多用途袖带 耐用型



## *All Purpose Cuffs*

如果你需要一个多用途血压计袖带，这款袖带再合适不过了。它采用锥形端头和耐用尼龙制成，是可靠性和舒适性的完美结合——为最广泛的临床用途和设备而生。

**传统设计：**高度耐用的尼龙材料和可拆卸的气囊设计可以进行清洁，以减少交叉污染。

**结实耐用：**采用缝合结构增加强度便于重复充气，为所有临床应用提供了持久的可重复使用袖带解决方案。有两年的保质期。

**简单易用：**独特的楔形尾翼设计使该耐用型袖带比普通直袖带更易于包裹和使用。尺寸颜色和范围标志区分让袖带尺寸、适合度和准确性的选择更容易。

**佩戴舒适：**通过消除使用中可能刺激患者的锐角，提高患者舒适度。

**可靠性：**100%泄漏测试，确保准确性和可靠性。

**规范：**满足AHA、AAMI-SP10和MDR等指导原则，值的信赖。


**多种配置：**具有各种接头选项的单气管或双气管配置，可灵活与大多数医疗机构设备连接。

**材料：**非天然橡胶乳胶、PVC或DEHP制成，以提升患者安全。



## 技术指标

单气管

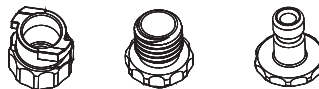

Range Symbols	Cuff Size (Print Color)	Range (cm)	Bladder Length x Width (mm)	Overall Length x Width (mm)	Female Quick Connect	Threaded (Screw)	Male Bayonet (Plastic)
	婴儿 (橘色)	8-13	110 x 38	230 x 63	98-0080-01	98-0084-21	98-0084-71
	儿童 (绿色)	12-19	150 x 68	315 x 93	98-0080-02	98-0084-22	98-0084-72
	小号成人 (宝蓝)	17-25	193 x 93	440 x 118	98-0080-04	98-0084-24	98-0084-74
	小号成人+ (宝蓝)	17-25	193 x 93	515 x 118	98-0080-05	98-0084-25	98-0084-75
	成人 (深蓝)	23-33	265 x 125	505 x 150	98-0080-06	98-0084-26	98-0084-76
	成人+ (深蓝)	23-33	265 x 125	645 x 150	98-0080-07	98-0084-27	98-0084-77
	大号成人 (深红)	31-40	320 x 158	645 x 183	98-0080-08	98-0084-28	98-0084-78
	大号成人+ (深红)	31-40	320 x 158	810 x 183	98-0080-09	98-0084-29	98-0084-79
	超大号 (棕色)	38-50	390 x 195	760 x 220	98-0080-10	98-0084-30	98-0084-80

## 设计指标

袖带组件	材料
袖带外层	尼龙, 丹尼尔系数200/聚氨酯复合材料
钩面	尼龙
毛面	尼龙
缝线	尼龙
气囊	尼龙, 丹尼尔系数200
通管	TPE (热塑性弹性体)
气嘴	聚氨酯
外层标识	聚酯

法规要求  
符合美国心脏协会80601-2-30指南  
符合 (EU)2017/745 医疗设备规定  
符合ISO 10993标准

## 符号

	指示线		产品符合 (EU)2017/745 医疗设备规定
	袖口指示线必须在标记范围内		臂围
	动脉符号和箭头应置于肱动脉或股动脉上方		袖带批号
	不含天然胶乳		制造商
	不含DEHP		警示标志
	警告消息		仅由持照从业者或根据持照从业者的指示进行设备销售

**SunTech**<sup>®</sup>  
Soft Disposable

**Thigh**

39-50 cm

**SunTech**<sup>®</sup>  
Soft Disposable

**SunTech**<sup>®</sup>  
Soft Disposable

Child

**SunTech**<sup>®</sup>



Patient

7-13 cm

**SunTech**<sup>®</sup>



Patient

3-5 cm

**SunTech**<sup>®</sup>



Patient

2-4 cm

**SunTech**<sup>®</sup>



Patient

**SunTech**<sup>®</sup>  
Soft Disposable

Infant

8-13 cm

INDEX

**SunTech**<sup>®</sup>  
Soft Disposable

**Large Adult**  
40-50 cm







  
**SunTech®**  
One Piece





SunTech Medical, Inc.  
5827 S Miami Blvd, Suite 100  
Morrisville, NC 27560-8394, USA  
Tel: + 1.919.654.2300  
1.800.421.8626  
Fax: + 1.919.654.2301  
SunTechMed.com



EMERGO Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

SunTech Medical (Shenzhen) Co. Ltd.  
105 HuanGuan South Road, Suite 15 2~3/F  
DaHe Community Guanlan,  
LongHua District, Shenzhen  
GuangDong PRC 518110  
Tel.: + 86.755.29588810  
+ 86.755.29588986 (Sales)  
+ 86.755.29588665 (Service)  
Fax: + 86.755.29588829  
SunTechMed.com.CN

# SUNTECH

