



  
**SunTech®** *Oscar 2™*  
24-HR ABPM



Şunlarla sağlanabilir:

SphygmoCor  
inside 

**24 Saat Ambulatuvar**  
Kan Basıncı İzleme Sistemi

## SunTech Oscar 2

SunTech Medical® Oscar 2™ sistemi en yüksek klinik standartları karşılayacak yenilikler yoluyla hasta rahatlığını en üst düzeye çıkaracak, klinisyenlere pratik yorumlayıcı analiz sağlayacak ve en son izleme gelişmeleri içerecek bir şekilde şirkete özel hareket toleranslı teknoloji kullanarak 24 saatlik ambulator kan basıncı izlemede (AKBM) standardı belirler.

Oscar 2 sistemi Birleşik Krallık Hipertansiyon Derneği (BHS), Avrupa Hipertansiyon Derneği (ESH) ve Uluslararası ve AAMI-SP10-standartlarının performans ve doğruluk gerekliliklerini karşılamak üzere bağımsız olarak test edilmiştir. Sistem standart olarak hem patentli Orbit™ AKBM Kafi hem yorumlayıcı yazılım Orbit™ Pro 4 ile gelir.

## Standart Özellikler

### SunTech Hareket Toleransı

Oscar 2 sistemi SunTech'in klinik doğruluk ve etkin veri toplamayı birleştiren Hareket Toleranslı osilometrik KB algoritmasını kullanır.

### Olay İşaretleme

Olay işaretleme için hasta tarafından erişilebilir bir kontrol, çabasız bir hasta deneyimini mümkün kılarken çalışmalar sırasında ek hasta verisi sağlar.

### Patentli Orbit AKBM Kafaları

Patentli *Orbit* manşon tasarımı klinik doğruluktan ödün vermeden hasta rahatlığını sağlar.


## İsteğe Bağlı Özellikler

### SphygmoCor Inside

SunTech Medical santral kan basıncı ve arteriyel sertliğin noninvaziv ölçümü için SphygmoCor Inside ile ilk ve tek AKB Monitörünü sunar.

Hipertansiyon yönetimini şu amaçlarla 24 saatlik santral kan basıncı analiziyle kişiye özel hale getirin:

- Hedef organ maruz kalma basıncını değerlendirmek.
- Arteriyel sertlik ve dalga refleksiyonlarının kan basıncı üzerine etkilerini değerlendirmek.

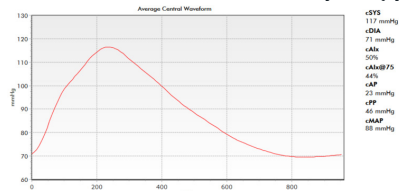

## Orbit™ Kan Basıncı Kafları

SunTech patentli Orbit kafi ambulatuar kan basıncı izleme uygulamaları için özellikle tasarlanmıştır. Bu kaf hastanın kolunu yumuşakça saran ve böylece yerleşimini koruyan ve uzun bir süre boyunca hasta rahatlığında en üst seviyeyi sağlayan yumuşak bir kılıfla tasarlanmıştır.



## AccuWin Pro™ 4 Yazılımı

AccuWin Pro 4 AKBM çalışmalarının yapılandırılması, analizi, yorumlanması ve bildirimini mümkün kılan Windows® tabanlı kullanıcı dostu bir programdır. Aşağıdakiler için verileri hızla yorumlama ve AHA, ESH veya JNC 7 kılavuz ilkelerine göre yorumlayıcı özetler oluşturma imkanına sahipsiniz:

- AKB seviyelerinin normallik açısından otomatik analizi
- beyaz gömlek sendromu
- gece düşen KB durumu

Oscar 2 AKBM sistemi daha önce karşılanmamış rahatlık, veri güvenilirliği ve güven açısından hasta odaklı bir çözüm iletir.



# Teknik Spesifikasyonlar

## Oscar 2 Sistemi Şunları İçerir

Oscar 2 monitörü  
AccuWin Pro™ 4 (AWP4) yazılımı (İndirilmek üzere)  
2 Orbit™ AKBM kafi (Yetişkin ve Yetişkin Plus)  
Taşıma torbası ve hasta kemeri  
USB arayüz kablosu  
Kullanıcı kılavuzu  
Standart 2 yıl garanti

## Genel Spesifikasyonlar

<b>Doğrulamalar:</b>	BHS (A/A), ESH, ANSI/AAMI SP10:2002
<b>KB Tekniği:</b>	Basamaklı söndürmeli osilometri
<b>KB Aralığı:</b>	25-260 mmHg
<b>KH Aralığı:</b>	40-200 atım/dk
<b>Örnekleme Dönemleri:</b>	3 ayarlanabilir (uyanık, uykuda ve özel)
<b>Zaman Aralıkları:</b>	5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90 ve 120 dk.
<b>Olay Düğmesi:</b>	Ek hasta ölçümlerini mümkün kılacak şekilde programlayın
<b>Veri Saklama:</b>	Flash bellek 250 adede kadar ölçüm saklar
<b>Güç Kaynağı:</b>	İki AA pil
<b>Ağırlık:</b>	284 gram, piller dahil
<b>Boyutlar:</b>	12 x 7 x 3 cm
<b>PC Gereklilikleri:</b>	USB portu, Windows® XP veya sonrası
<b>Uygulama Gereklilikleri:</b>	Apple iPhone



Dünya sınıfı kan basıncı teknolojimizi geliştirmeye adanmış 30 yılı aşkın süreyle hiçbir atımı kaçırmayacağımızdan eminiz ve böylece siz de kaçırmazsınız. Bu bizim mirasımız. Bu SunTech Medical. **Bu Klinik Sınıftaki Fark.**



SunTech Medical, Inc.  
507 Airport Boulevard, Suite 117  
Morrisville, NC 27560-8200 ABD  
Tel: + 1.919.654.2300  
1.800.421.8626  
Faks: +1.919.654.2301  
SunTechMed.com



SunTech Medical, Ltd.  
Oakfield Industrial Estate  
Stanton Harcourt Road  
Eynsham, Oxfordshire OX29 4TS  
İngiltere  
Tel: + 44 (0) 1865.884.234  
Faks: + 44 (0) 1865.884.235  
SunTechMed.com

SunTech Medical (Shenzhen) Co., Ltd.  
105 HuanGuan South Road, Suite 15 2--3/F  
DaHe Community Guanlan,  
LongHua District, Shenzhen  
GuangDong PRC 518110  
Tel: + 86.755.29588810  
+ 86.755.29588986 (Satış)  
+ 86.755.29588665 (Servis)  
Faks: + 86.755.29588829  
SunTechMed.com.CN





## SunTech Oscar2 Parça Numarası

### Oscar 2 Sistem Monitörleri

- 99-0133-00 Oscar 2 Monitörü - Standart
- 99-0133-02 Oscar 2 Monitörü - SphygmoCor Inside ile
- 99-0133-10 Oscar 2 Monitörü - Standart - AWP4 olmadan
- 99-0133-12 Oscar 2 Monitörü - SphygmoCor Inside ile - AWP4 olmadan
- 98-0056-00 Oscar 2™ PowerPack Aksesuar Kiti

### Orbit™ Comfort Kan Basıncı Kafaları

- 98-0239-01 #1 Orbit™ AKBM Kafi (18-26 cm)
- 98-0239-02 #2 Orbit™ AKBM Kafi (26-34 cm)
- 98-0239-03 #3 Orbit™ AKBM Kafi (32-44 cm)
- 98-0239-04 #4 Orbit™ AKBM Kafi (42-55 cm)

### Şeritler ve Kemerler

- 98-0032-07 Oscar 2™ Torbası
- 98-0037-00 Oscar 2™ Kemer

### Uzatılmış Garanti Programı

- 99-0027-00 Bir Yıl Uzatılmış Garanti
- 99-0027-03 Üç Yıl Uzatılmış Garanti

### Uzatılmış Garanti Şartları ve Koşulları

Uzatılmış Garanti şu durumlardan biri şeklinde satın alınmalıdır:

- Orijinal satış zamanında
- Başlangıç garanti dönemi bitmeden
- Satın alınmış uzatılmış garanti dönemi bitmeden