




SunTech[®] *Oscar 2*[™]
24-HR ABPM



Şunlarla sağlanabilir:

SphygmoCor
inside 

24 Saat Ambulatuvar
Kan Basıncı İzleme Sistemi

SunTech Oscar 2

SunTech Medical® Oscar 2™ sistemi en yüksek klinik standartları karşılayacak yenilikler yoluyla hasta rahatlığını en üst düzeye çıkaracak, klinisyenlere pratik yorumlayıcı analiz sağlayacak ve en son izleme gelişmeleri içerecek bir şekilde şirkete özel hareket toleranslı teknoloji kullanarak 24 saatlik ambulator kan basıncı izlemede (AKBM) standardı belirler.

Oscar 2 sistemi Birleşik Krallık Hipertansiyon Derneği (BHS), Avrupa Hipertansiyon Derneği (ESH) ve Uluslararası ve AAMI-SP10-standartlarının performans ve doğruluk gerekliliklerini karşılamak üzere bağımsız olarak test edilmiştir. Sistem standart olarak hem patentli Orbit™ AKBM Kafı hem yorumlayıcı yazılım Orbit™ Pro 4 ile gelir.

Standart Özellikler

SunTech Hareket Toleransı

Oscar 2 sistemi SunTech'in klinik doğruluk ve etkin veri toplamaı birleştiren Hareket Toleranslı osilometrik KB algoritmasını kullanır.

Olay İşaretleme

Olay işaretleme için hasta tarafından erişilebilir bir kontrol, çabasıız bir hasta deneyimini mümkün kılarken çalışmalar sırasında ek hasta verisi sağlar.

Patentli Orbit AKBM Kafı

Patentli Orbit manşon tasarımıımız klinik doğruluktan ödün vermeden hasta rahatlığını sağlar.


İsteğe Bağlı Özellikler

SphygmoCor Inside

SunTech Medical santral kan basıncı ve arteriyel sertliğin noninvaziv ölçümü için SphygmoCor Inside ile ilk ve tek AKB Monitörünü sunar.

Hipertansiyon yönetimini şu amaçlarla 24 saatlik santral kan basıncı analiziyle kişiye özel hale getirin:

- Hedef organ maruz kalma basıncını değerlendirmek.
- Arteriyel sertlik ve dalga refleksiyonlarının kan basıncı üzerine etkilerini değerlendirmek.

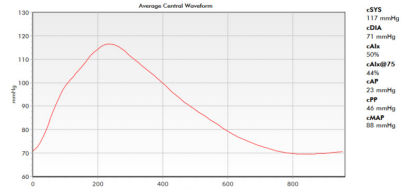

Orbit™ Kan Basıncı Kafaları

SunTech patentli Orbit kafi ambulatuar kan basıncı izleme uygulamaları için özellikle tasarlanmıştır. Bu kaf hastanın kolunu yumuşakça saran ve böylece yerleşimini koruyan ve uzun bir süre boyunca hasta rahatlığında en üst seviyeyi sağlayan yumuşak bir kılıfla tasarlanmıştır.




AccuWin Pro™ 4 Yazılımı

AccuWin Pro 4 AKBM çalışmalarının yapılandırılması, analizi, yorumlanması ve bildirimini mümkün kılan Windows® tabanlı kullanıcı dostu bir programdır. Aşağıdakiler için verileri hızla yorumlama ve AHA, ESH veya JNC 7 kılavuz ilkelerine göre yorumlayıcı özetler oluşturma imkanına sahipsiniz:

- AKB seviyelerinin normallik açısından otomatik analizi
- beyaz gömlek sendromu
- gece düşen KB durumu

Oscar 2 AKBM sistemi daha önce karşılanmamış rahatlık, veri güvenilirliği ve güven açısından hasta odaklı bir çözüm iletir.

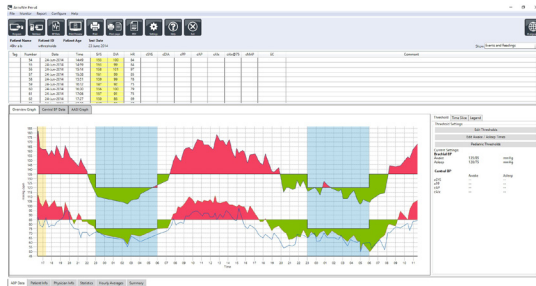

Teknik Spesifikasyonlar

Oscar 2 Sistemi Şunları İçerir

Oscar 2 monitörü
AccuWin Pro™ 4 (AWP4) yazılımı (İndirilmek üzere)
2 Orbit™ AKBM kafi (Yetişkin ve Yetişkin Plus)
Taşıma torbası ve hasta kemeri
USB arayüz kablosu
Kullanıcı kılavuzu
Standart 2 yıl garanti

Genel Spesifikasyonlar

Doğrulama:	BHS (A/A), ESH, ANSI/AAMI SP10:2002
KB Tekniği:	Basamaklı söndürmeli osilometri
KB Aralığı:	25-260 mmHg
KH Aralığı:	40-200 atım/dk
Örnekleme Dönemleri:	3 ayarlanabilir (uyanık, uykuda ve özel)
Zaman Aralıkları:	5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90 ve 120 dk.
Olay Düğmesi:	Ek hasta ölçümlerini mümkün kılacak şekilde programlayın
Veri Saklama:	Flash bellek 250 adede kadar ölçüm saklar
Güç Kaynağı:	İki AA pil
Ağırlık:	284 gram, piller dahil
Boyutlar:	12 x 7 x 3 cm
PC Gereklilikleri:	USB portu, Windows® XP veya sonrası
Uygulama Gereklilikleri:	Apple iPhone


SunTech Medical®
The Difference in Clinical Grade®

Dünya sınıfı kan basıncı teknolojimizi geliştirmeye adanmış 30 yılı aşkın süreyle hiçbir atımı kaçırmayacağımızdan eminiz ve böylece siz de kaçırmazsınız. Bu bizim mirasımız. Bu SunTech Medical. **Bu Klinik Sınıftaki Fark.**



SunTech Medical, Inc.
507 Airport Boulevard, Suite 117
Morrisville, NC 27560-8200 ABD
Tel: + 1.919.654.2300
1.800.421.8626
Faks: +1.919.654.2301
SunTechMed.com



EMERGO Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

SunTech Medical (Shenzhen) Co., Ltd.
105 HuanGuan South Road, Suite 15 2~3/F
DaHe Community Guanlan,
LongHua District, Shenzhen
GuangDong PRC 518110
Tel: + 86.755.29588810
+ 86.755.29588986 (Satış)
+ 86.755.29588665 (Servis)
Faks: + 86.755.29588829
SunTechMed.com.CN





SunTech Oscar2 Parça Numarası

Oscar 2 Sistem Monitörleri

- 99-0133-00 Oscar 2 Monitörü - Standart
- 99-0133-02 Oscar 2 Monitörü - SphygmoCor Inside ile
- 99-0133-10 Oscar 2 Monitörü - Standart - AWP4 olmadan
- 99-0133-12 Oscar 2 Monitörü - SphygmoCor Inside ile - AWP4 olmadan
- 98-0056-00 Oscar 2™ PowerPack Aksesuar Kiti

Orbit™ Comfort Kan Basıncı Kafaları

- 98-0239-01 #1 Orbit™ AKBM Kafı (18-26 cm)
- 98-0239-02 #2 Orbit™ AKBM Kafı (26-34 cm)
- 98-0239-03 #3 Orbit™ AKBM Kafı (32-44 cm)
- 98-0239-04 #4 Orbit™ AKBM Kafı (42-55 cm)

Şeritler ve Kemerler

- 98-0032-07 Oscar 2™ Torbası
- 98-0037-00 Oscar 2™ Kemer

Uzatılmış Garanti Programı

- 99-0027-00 Bir Yıl Uzatılmış Garanti
- 99-0027-03 Üç Yıl Uzatılmış Garanti

Uzatılmış Garanti Şartları ve Koşulları

Uzatılmış Garanti şu durumlardan biri şeklinde satın alınmalıdır:

- Orijinal satış zamanında
- Başlangıç garanti dönemi bitmeden
- Satın alınmış uzatılmış garanti dönemi bitmeden