



 SunTech® **Vet25™**  
BP MONITOR



**Monitor de Pressão Arterial Pontual e Contínua**  
para Animais de Estimação

# SunTech Vet25

Com rapidez e praticidade, o monitor SunTech® Vet25™ realiza medições confiáveis da pressão arterial (PA) para exames de bem-estar, testes rápidos e durante o monitoramento de animais de estimação pré e pós-procedimentos veterinários. Os intervalos podem ser configurados para fazer as leituras de PA automaticamente durante um período de monitoramento. Utilizando a confiável tecnologia Advantage™ VET BP da SunTech, o Vet25 executa silenciosamente medições PA tolerantes ao movimento e fornece resultados precisos. A interface intuitiva da tela sensível ao toque tem todos os recursos necessários para revisar e analisar os dados da PA.

## Características padrão

**Confiabilidade:** Graças à tecnologia de tolerância ao movimento da SunTech, o Vet25 tem um elevado índice de sucesso em leituras de PA.

**Praticidade:** A interface intuitiva da tela sensível ao toque tem todos os recursos necessários para revisar, analisar e transferir os dados da PA. Uso indicado para clínicas veterinárias, não pesquisadores.

**Precisão:** O algoritmo da PA foi desenvolvido exclusivamente para animais de estimação por especialistas em uma das melhores instituições de medicina veterinária.

### Monitoramento

**contínuo:** O monitoramento durante procedimentos é simples, com intervalos definidos pelo usuário para a medição PA.


**Memória:** Até 960 pontos de dados são salvos e mantidos mesmo quando o dispositivo está desligado. O usuário pode selecionar medições específicas da memória do dispositivo e calcular, de forma automatizada, as médias da PA.

**Portabilidade:** Quando alimentado por bateria, o dispositivo pode ser facilmente movido para diferentes locais de monitoramento.

**Recarregável:** A bateria é recarregada quando o dispositivo está conectado à alimentação CA, reduzindo o desperdício da bateria.

### Transferência

**de dados:** Os dados podem ser transferidos para um software aplicativo para análise de tendências e geração de relatórios para computador através de conexão Bluetooth. Use o aplicativo para PC para exportar relatórios em formato PDF ou CSV.

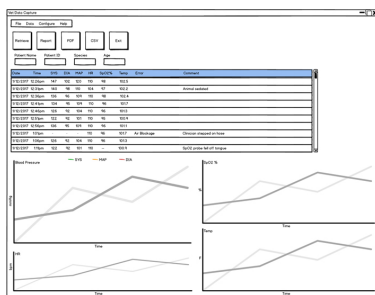



## Especificações técnicas

### O Vet25 inclui:

- Monitor do sistema Vet25
- Capa protetora nas cores rosa-flamingo, azul-pavão ou verde-ervilha
- Manguitos veterinários para pressão arterial nos tamanhos 1-6
- Mangueira do paciente, 1,8 m
- Adaptador CA

### Especificações gerais

<b>Sistólica:</b>	40 a 265 mmHg
<b>Diastólica:</b>	20 a 200 mmHg
<b>Pressão arterial média:</b>	27 a 222 mmHg
<b>Frequência cardíaca:</b>	25 a 300 BPM
<b>Peso do dispositivo:</b>	aprox. 950 gramas (com bateria)
<b>Dimensões:</b>	15,9 cm x 12,7 cm x 13,3 cm
<b>Garantia:</b>	2 anos para o monitor 90 dias para os manguitos/mangueiras

### Acessórios

#### Capa do SunTech Vet25

A capa protetora removível é disponível em 3 cores e possui uma alça de fácil manuseio.



Rosa-flamingo



Azul-pavão



Verde-ervilha

#### Adaptador CA

O Vet25 é um dispositivo portátil que pode ser facilmente deslocado um ambiente para outro quando necessário. Basta conectar o adaptador CA para recarregar a bateria de íon de lítio ao Vet25. O adaptador CA vem com 4 padrões de plugues de tomadas, atendendo à maioria dos requisitos internacionais de energia.

## Manguitos para uso veterinário SunTech



A solução em manguitos é composta de materiais macios e tem os cantos arredondados, proporcionando conforto ao usuário. Os manguitos SunTech para medição da PA são codificados por cores, para definição rápida do tamanho, e os indicadores de alcance garantem dimensionamento e encaixe precisos. O Vet25 PA vem com manguitos de tamanho 1-6. **A linha de manguitos PA vet da SunTech pode ser usada com outros monitores de PA veterinários! Saiba mais sobre nosso kit de conversão de manguitos SunTech Vet.**

  
**SunTech Medical**<sup>®</sup>  
The Difference in Clinical Grade<sup>®</sup>

Com mais de 30 anos dedicados a desenvolver nossa tecnologia de pressão arterial avançada, temos certeza de que nunca perdemos o compasso - e você também não vai perder. É nosso legado. Somos a SunTech Medical. **É a diferença de padrão clínico.**



SunTech Medical, Inc.  
507 Airport Boulevard, Suite 117  
Morrisville, NC 27560-8200 EUA  
Tel: + 1.919.654.2300  
1.800.421.8626  
Fax: + 1.919.654.2301  
SunTechMed.com

SunTech Medical (Shenzhen) Co., Ltd.  
105 HuanGuan South Road, Suite 15 2~3/F  
DaHe Community Guanlan,  
LongHua District, Shenzhen  
GuangDong China 518110  
Tel.: + 86.755.29588810  
+ 86.755.29588986 (vendas)  
+ 86.755.29588665 (assistência técnica)  
Fax: + 86.755.29588829  
SunTechMed.com.CN





## Números de peças do SunTech Vet25

### Monitores do sistema Vet25

- 99-0170-00 Monitor Vet25, capa na cor rosa-flamingo
- 99-0170-01 Monitor Vet25, capa na cor azul-pavão
- 99-0170-02 Monitor Vet25, capa na cor verde-ervilha

### Linha veterinária de manguitos de PA da SunTech

- |                |                              |                 |                     |
|----------------|------------------------------|-----------------|---------------------|
| 98-0400-80-VET | Manguito N°1                 | caixa com 20    | alcance de 3-6 cm   |
| 98-0400-81-VET | Manguito N°2                 | caixa com 20    | alcance de 4-8 cm   |
| 98-0400-82-VET | Manguito N°3                 | caixa com 20    | alcance de 6-11 cm  |
| 98-0400-83-VET | Manguito N°4                 | caixa com 20    | alcance de 7-13 cm  |
| 98-0400-84-VET | Manguito N°5                 | caixa com 20    | alcance de 8-15 cm  |
| 98-0400-F1     | Manguito N°6                 | caixa com 20    | alcance de 12-19 cm |
| 98-0400-F3     | Manguito N°7                 | caixa com 20    | alcance de 17-25 cm |
| 98-0240-00     | Manguitos 1-6                | embalagem com 6 |                     |
| 91-0028-75     | Mangueira do paciente, 1,8 m |                 |                     |
| 91-0028-76     | Mangueira do paciente, 3 m   |                 |                     |

### Acessórios

- 39-0195-03 Capa na cor rosa-flamingo
- 39-0195-04 Capa na cor azul-pavão
- 39-0195-02 Capa na cor verde-ervilha
- 19-0020-00 Adaptador CA
- 17-0026-00 Substituição da bateria de íon de lítio

### Programa de Garantia Estendida

- 83-0022-00 Garantia de um ano estendida
- 83-0022-01 Garantia de três anos estendida

### Termos e Condições da Garantia Estendida

A garantia estendida pode ser adquirida:

- No ato da compra original
- Antes da expiração do período de garantia inicial