

**Blutdruckmonitor für  
Spot-Check-Messung und Monitoring**  
bei Haustieren

---

**Vet25**

# SunTech Vet25

Der tragbare, wiederaufladbare SunTech®-Monitor Vet25™ liefert rasch und unkompliziert zuverlässige Blutdruckwerte im Rahmen eines Check-Ups, als Einzelmessungen sowie in der Überwachung von Haustieren vor und nach Eingriffen. Die Messintervalle für automatische Blutdruckmessungen während des Monitorings sind einstellbar. Mit der bewährten und bewegungstoleranten Advantage™-Technologie für die Blutdruckmessung an Haustieren ermittelt der Vet25 fast geräuschlos genaue Ergebnisse. Der intuitiv bedienbare Touchscreen bietet alle Funktionen für die Kontrolle und Analyse der Blutdruckdaten.

## Allgemeine Merkmale

**Zuverlässig:** Durch die bewegungstolerante SunTech-Technologie sind Fehlmessungen mit dem Vet25 weitgehend ausgeschlossen.

**Einfache Bedienung:** Auf dem intuitiv bedienbaren Touchscreen sind alle Funktionen für die Kontrolle, Analyse und Übertragung der Blutdruckdaten vorhanden. Ein Gerät für Tierkliniken, nicht für die Forschung.

**Genau:** Der Algorithmus für die Blutdruckmessung wurde speziell für Haustiere an einer der führenden veterinärmedizinischen Hochschulen entwickelt.


**Kontinuierliches Monitoring:** Die individuell einstellbaren Intervalle für die Blutdruckmessung sind eine wesentliche Vereinfachung für das Monitoring während Eingriffen.

**Speicher:** Es werden bis zu 960 Datenpunkte gespeichert; der Speicherinhalt bleibt auch bei ausgeschaltetem Gerät erhalten. Aus den gespeicherten Messungen können bestimmte Werte ausgewählt und zur automatischen Mittelwertbildung herangezogen werden.

**Tragbar:** Durch die netzunabhängige Versorgung ist das Gerät ideal für den Einsatz an verschiedenen Orten.

**Wiederaufladbar:** Sobald das Gerät am Netz angeschlossen ist, wird die Batterie geladen. Es entsteht also weniger Abfall durch Einwegbatterien.

**Datenübertragung:** Über Bluetooth können Daten an einen PC übertragen werden, wo eine spezielle Software-Anwendung Trends und Reports erstellt. Mit dieser Anwendung können Sie darüber hinaus Report-Daten im PDF- oder CSV-Format exportieren.

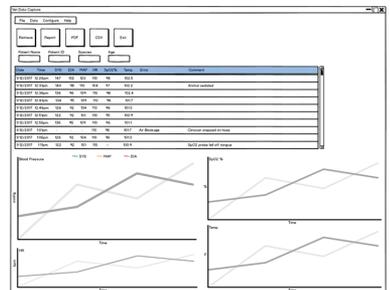



## Technische Daten

### Vet25-Lieferumfang:

- Vet25-Monitor
- Schutzgehäuse in flamingopink, pfauenblau oder laubfroschgrün
- Blutdruckmanschetten für Veterinärmedizin, Größe 1–6
- Manschettenschlauch, 1,8 m
- Netzteil

### Allgemeine Spezifikationen

Systole:	40–265 mmHg
Diastole:	20–200 mmHg
Mittlerer arterieller Druck:	27–222 mmHg
Herzfrequenz:	25–300 /min
Gewicht:	ca. 950 g (mit Batterie)
Abmessungen:	ca. 15,9 cm x 12,7 cm x 13,3 cm
Garantie:	2 Jahre für den Monitor 90 Tage für Manschetten/Schlauch

## Zubehör

### Gehäuse für SunTech Vet25

Bei dem abnehmbaren Schutzgehäuse mit bequemem Griff haben Sie die Wahl zwischen 3 Farben.



Flamingopink



Pfauenblau



Laubfroschgrün

### Netzteil

Der Vet25 ist ein tragbares Gerät, das Sie problemlos von einem Raum zum anderen mitnehmen können, wenn Sie es brauchen. Schließen Sie zum Laden des Lithium-Ionen-Akkus im Vet25 einfach das Steckernetzteil an. Das Netzteil wird mit 4 verschiedenen Steckervarianten geliefert und ist daher mit fast sämtlichen Netzanschlussystemen weltweit kompatibel.

# SunTech-Manschetten für die Veterinärmedizin



Angenehme Manschette durch weiches Material und abgerundete Ecken. Durch die unterschiedlichen Farben der Manschetten von SunTech Medical lässt sich die richtige Größe rasch auswählen; die Bereichsmarkierungen erleichtern das korrekte Anlegen. Mit dem Vet25-Blutdruckgerät erhalten Sie Manschetten der Größe 1 bis 6. *Die Manschetten von SunTech können*

*auch mit anderen Blutdruckgeräten für Veterinärmedizin verwendet werden! Fragen Sie nach dem SunTech-Umrüst-Kit für Veterinärmanschetten.*

# SUNTECH

*Seit über 30 Jahren widmen wir uns der Entwicklung erstklassiger Blutdruck-Technologie. Daher sind wir sicher, dass bei den Messungen nichts verborgen bleibt – und Sie können es auch sein. Das ist unsere Tradition. Das ist SunTech Medical. Das macht den Unterschied zur Spitzenklasse.*



SunTech Medical, Inc.  
5827 S Miami Blvd, Suite 100  
Morrisville, NC 27560-8394, USA  
Tel: + 1.919.654.2300  
1.800.421.8626  
Fax: +1.919.654.2301  
SunTechMed.com

SunTech Medical (Shenzhen) Co., Ltd.  
105 HuanGuan South Road, Suite 15 2-3/F  
DaHe Community Guanlan,  
LongHua District, Shenzhen  
GuangDong PRC 518110  
Tel.: + 86.755.29588810  
+ 86.755.29588986 (Sales)  
+ 86.755.29588665 (Service)  
Fax: + 86.755.29588829  
SunTechMed.com.CN





## Artikelnummern für SunTech Vet25

### Vet25-Systemmonitore

- 99-0170-00 Vet25 Monitor, Gehäuse in flamingopink
- 99-0170-01 Vet25 Monitor, Gehäuse in pfauenblau
- 99-0170-02 Vet25 Monitor, Gehäuse in laubfroschgrün

### SunTech-Blutdruckmanschetten für die Veterinärmedizin

98-0400-80-VET	Manschette 1	20 Stück	Bereich 3–6 cm
98-0400-81-VET	Manschette 2	20 Stück	Bereich 4–8 cm
98-0400-82-VET	Manschette 3	20 Stück	Bereich 6–11 cm
98-0400-83-VET	Manschette 4	20 Stück	Bereich 7–13 cm
98-0400-84-VET	Manschette 5	20 Stück	Bereich 8–15 cm
98-0400-F1	Manschette 6	20 Stück	Bereich 12–19 cm
98-0400-F3	Manschette 7	20 Stück	Bereich 17–25 cm
98-0240-00	Manschetten 1–6	6 Stück	
91-0028-75	Manschettenschlauch, 1,8 m		
91-0028-76	Manschettenschlauch, 3 m		

### Zubehör

- 39-0195-03 Gehäuse in flamingopink
- 39-0195-04 Gehäuse in pfauenblau
- 39-0195-02 Gehäuse in laubfroschgrün
- 19-0020-00 Netzteil
- 17-0026-00 Lithium-Ionen-Ersatzakku

### Garantieverlängerung

- 83-0022-00 Garantieverlängerung um ein Jahr
- 83-0022-01 Garantieverlängerung um drei Jahre

### Vertragsbedingungen für die Garantieverlängerung

Eine Garantieverlängerung kann erworben werden:

- zum Zeitpunkt des Erstkaufs
- vor Ablauf des ursprünglichen Garantiezeitraums